

DICTUS®

— The Dictus Band —

Hjälpmidlet för ett lättare sätt att gå

Dictus Hip passar till personer med svaga höftflexorer t.ex. Multiple Skleros (MS) som har generell svaghet i benet/benen.

Dictus Hip anpassas lätt och smidigt, ortosen ger direkt återkoppling om resultat utan stort anpassningsarbete.

Dictus Hip finns i två varianter. Dictus HIP-Knee och Dictus HIP-Foot.

Dictus Hip-Knee består av ett bekvämt höftbälte och elastiskt gummiband som fästs i lårdelen.

Dictus HIP-Foot består av ett bekvämt höftbälte och elastiskt gummiband med knäband som fästs i fotdelen

Gummibandet assisterar vid höftflexion. Nivån och dragriktningen på assistansen kan lätt ställas in efter brukarens behov, lätt att ändra flektion, adduktions, inåtrotations dragriktning. Används Dictus HIP-Foot så kan även fot inversionen korrigeras

Dictus Hip kan användas över vanliga kläder eller under löst sittande kläder. Ortosen kan användas på ena eller båda benen den är universal.



Art. nr. och storlekar på baksidan

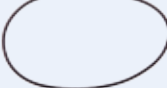
Användningsområde:

Dictus Hip kan vara fördelaktig för patienter med t.ex. MS som har; svaghet i höftböjaren, begränsad uthållighet och ev. utmattning vid gång, svårt att lyfta ben. Använder kompensatoriska rörelser såsom bäckentippning, circumduktion och/ eller tyngdöverföring till motsatt sida.

Användare får genom Dictus Hip hjälp att få fram benet i svingfasen av steget och därmed en bättre gång.

www.erimed.se

order@erimed.se, Tel +46 (0)8 449 56 50

	Art. nr.	Produkt Dictus HIP
	530500-011	Dictus HIP-Knee DS-50M Komplet Medium (höftbälte M, lårdel M, 2 gummiband 50cm)
	530500-021	Dictus HIP-Knee DS-50L Komplet Large (höftbälte L, lårdel L, 2 gummiband 50cm)
	530500-311	Dictus HIP-Foot DS-53M Komplet Medium (höftbälte M, fotdel, 2 gummiband 100cm, 2 par S-krokar, Monokrok)
	530500-321	Dictus HIP-Foot DS-53L Komplet Large (höftbälte L, fotdel, 2 gummiband 100cm, 2 par S-krokar, Monokrok)
	530510-011	Dictus HIP DS-51M Höftbälte Medium 55-80 cm Midjemått
	530510-021	Dictus HIP DS-51L Höftbälte Large 80-130 cm Midjemått
	530520-011	Dictus HIP DS-52M Lårdel Medium 30-40 cm Lårmått 10cm över patella
	530520-021	Dictus HIP DS-52L Lårdel Large >40 cm Lårmått 10cm över patella
	530300-011	Dictus in DS-03, fotdel
	530100-050	Gummiband 50 cm/ st för Dictus HIP-Knee
	530100-101	Gummiband 100 cm/ st med knäband för Dictus HIP-Foot
	530100-100	Gummiband 100 cm/ st
	530100-003	S-krokar / par
	530100-001	Plastkrokar / par
	530100-002	Monokrok till Dictus / st