

Dictus Flex

Dictus ger brukare med droppfot ett rörligare liv.

Dictusbandet har hjälpt tusentals brukare som drabbats av droppfot att återgå till en normal vardag. Bandet lyfter foten direkt efter toe off, vilket minskar risken för att snubbla på trösklar, mattkanter eller kullersten. Därmed kan brukaren åter ta sig runt obehindrat, njuta av promenader och slippa oroa sig för olyckor.


Dictusbandet är ett diskret hjälpmedel som passar skor med snörning. Det består av ett vristband, ett gummi-band och en fästianordning som monteras i skon. Vristbandet fästs enkelt runt benet med kardborrband

och sitter bekvämt hela dagen. Bandet tillverkas i äkta läder som blir mjukare och skönare för varje användning. Vristbandet kopplas samman med fästianordningen i skon genom ett silikon-gummiband med två integrerade velcroplattor. Flex-silikon-gummibandet ger ett stabilt stöd för foten och kan enkelt spännas åt så mycket som patienten önskar.

Läs mer om Dictus Flex och se instruktionsfilmen på vår hemsida.

Fördelar:

- Ger brukaren trygghet och frihet genom att minska risken för att snubbla omkull.
- Tillverkat i läder som håller länge och blir mjukare för varje användning.
- Flex-silikon-gummiband som kan spännas åt.
- Diskret hjälpmedel som passar de flesta sorters skor.
- Finns för både barn och vuxna.

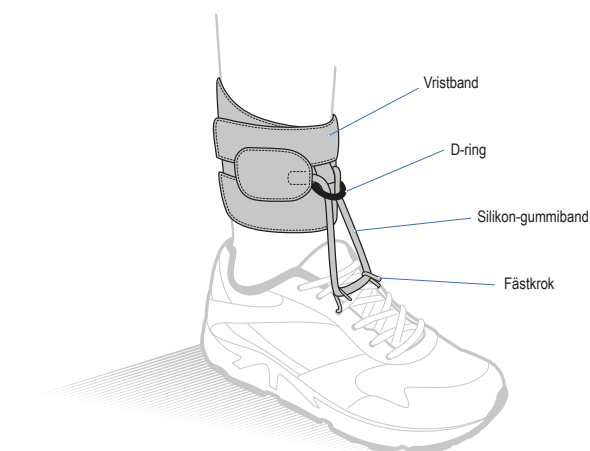

Dictus Flex

	Artikelnr	Produkt		Färg
	530400-031	Dictus DS-04XL	Xlarge >26 cm	Svart
	530400-021	Dictus DS-04L	Large 20-27 cm	Svart
	530400-011	Dictus DS-04M	Medium 15-20 cm	Svart
	530400-000	Dictus DS-04J	Barn 12-17 cm	Svart
	530300-011	DS-03R	Barfota höger	Svart
	530300-111	DS-03L	Barfota vänster	Svart
	530100-400	Flex-gummiband J/M 35 cm		Svart
	530100-440	Flex-gummiband L/XL 40 cm		Svart
	532100-004	S-krokar, 4-pack		
	530100-001	Plastkrokar / par		Svart
	530100-002	Monokrok till Dictus / st		Svart