

College Park

CAPITAL hydraulic knee

sjö och dusch anpassad*



Växla lätt mellan låst, normal och öppet läge på pumpen




Enkel justering av flexion och extension motstånd med en 4mm insektnyckel

CAPITAL
distal pyramid
art. nr. 760350-000

Tillbehör

CAPITAL
34 mm röranslutning
art. nr. 760351-000

34mm Rör med adapter
art. nr. 760351-430

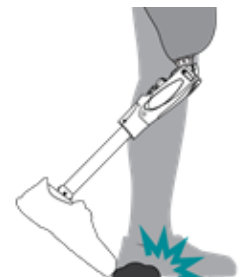

Snubbel säkring, flexionsmotståndet återgå automatiskt till högt om brukaren stöter till en sten med tån i svingfasen.

Pumpen möjliggör en trygg och säker trappgång.

Tekniska data:

Vikt

980 g

Max patient vikt

150 kg

Max flexionsvinkel

130°

Längd

230 mm

Kupol till knäcentrum

17 mm

* sjö och dusch anpassad vissa restriktioner finns