

INLÄGG, MATERIAL, STRUMPOR

för ortopediska ändamål

2023



Erimed's vision är att ge alla människor med funktionsvariationer ett optimalt liv.

Vi utvecklar och marknadsför produkter som bidrar till att underlätta samt optimera alla funktionsnedsatta individers aktiva vardagsliv med mottot "ingenting är omöjligt".

För mer information om oss och för att se hela vårt produktsortiment rekommenderar vi att ni besöker **www.erimed.se** eller kontaktar oss på **order@erimed.se** alternativt **Tel. +46 8 449 56 50**.

I denna broschyr presenterar vi viktiga tillbehör till vårt skosortiment vilket återfinns i annat broschyrmaterial.

Inlägg

Att enbart erbjuda skor till en person med speciella ortopediska behov är inte alltid fullgott, utan många individer behöver även separata inlägg. Inläggen som presenteras i denna broschyr är utvecklade för att enkelt kunna värmas, slipas och formas om efter individens behov.

Vi erbjuder såväl termoplastiska inlägg som EVA-inlägg, samt termoplastiska carbonsulor och -plattor.

Termoplastiska inlägg kan med försiktighet omformas med hjälp av t.ex varmluftpistol eller ugn i låga temperaturer (ca 80°-150°C.) . Extra försiktighet skall iaktas vid omformning av termoplastiska material med PPT.

Inlägg av EVA-material skall i första hand slipas till önskad form. Vid uppvärmning kan inte materialets egenskaper garanteras.

Material

Som komplement till våra inlägg återfinner ni även olika typer av täckmaterial för specialtillverkning och anpassning av inläggen, samt även pelotter, mätverktyg och skoöverdrag.

Strumpor

Individer med fötter som har skör hud, ofta svullnar, har förhårdnader och där man även har känselbortfall behöver lägga mycket stor vikt vid såväl skor, inlägg som vilka strumpor de har på fötterna.

Våra Diabetesstrumpor är framtagna speciellt för dessa individer och en stark rekommendation för att tillsammans med övriga åtgärder skapa bäst möjliga förutsättningar för livslång fothälsa.


Strumporna är söm-lösa för att minska risken för skav och tryck, samt de har ingen åtsittande resårkant vilket minskar risken för tryck vid svullnad. Valda strumpor har även extra mjuk plysch under foten, över tårna och runt hälen.

Det finns även strumpor för ortosanvändare i bomull samt i CoolMax – ett mycket behagligt material som är utformat för att snabbt flytta svett från huden till utsidan av tyget, och bidrar till att huden känns torr och komfortabel.

HeelPad är en halv-strumpa med silikon i häl-delen. Den används för att mjuka upp förhårdnader och bidrar till att hälsprickor läker snabbt. Skall användas med försiktighet av diabetiker, och instruktioner i förpackningen skall alltid följas.

INLÄGG

Samtliga Thermoplastiska inlägg i Pedi-serien är täckta med Arnedry™. Ett fuktabsorberande andningsbart micro-fibermaterial som eliminerar lukt, håller fötterna torra och fräscha samt är tvätt-/avtorkningsbart.

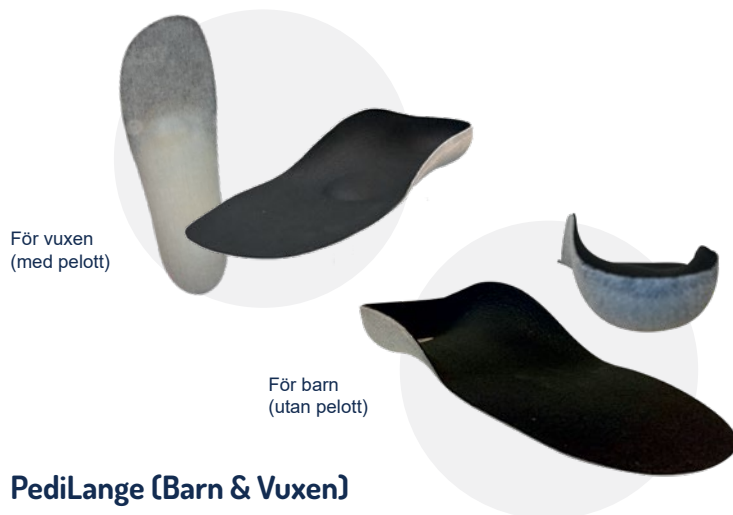

PediLange (Barn & Vuxen)

Thermoplastinlägg med smalare profil och höga kanter. Täckmaterial Arnedry. Säljs i par. Dubbelstorlekar (19-20, 21-22 osv).

Storlek:

Barn (utan pelott): 19-20, 21-22 osv till 33-34

Vuxen (med pelott): 35-36, 37-38 osv till 49-50

Artikelnummer: 791000-020, -022 osv till -050




PediTeP

Thermoplastinlägg med 3 mm PPT, bredare profil och medelhög kant. Täckmaterial Arnedry. Undersida av Suetex. Med pelott. Säljs i par.

Storlek: 35-48

Artikelnummer: 791010-035, -036 osv till -048

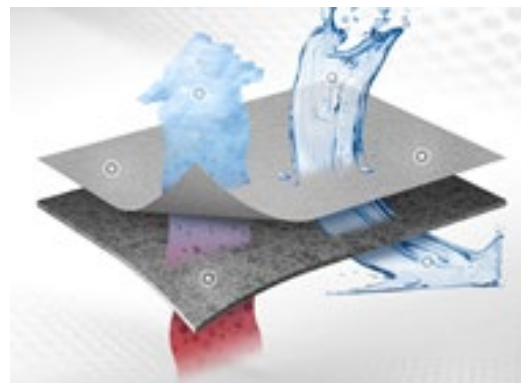

Arnedry™



PediTherm

Thermoplastinlägg med bredare profil och medelhög kant. Täckmaterial Arnedry. Undersida av Suetex. Med pelott. Säljs i par.

Storlek: 35-48

Artikelnummer: 791020-035, -036 osv till -048



Escombine kort med PPT

Ett thermoplastiskt inlägg väl lämpat att användas vid överbelastningsproblem. Ovanmaterial av 3 mm skinnbeklädd PPT. Säljs i par.

Storlek: 35-46

Artikelnummer: 814121-035, -036 osv till -046

INLÄGG



Star (Barn)

Ett thermoplastiskt inlägg med ovanmaterial i 3 mm EVA-material. Djup hälkopp och medialt stöd. Säljs i par, i förpackning om två par. För barn. Dubbelstorlekar (21-22, 23-24 osv).

Storlek: 21-22, 23-24 osv till 35-36

Artikelnummer: 373910-022, -024 osv till -036



PediEVA 30 (Barn & Vuxen)

Ett ljusgrått inlägg i EVA-material med 30 Shore och bra medialt stöd. Grovslipad för att snabbt kunna anpassas. Kan täckas med microfiber. Säljs i par. Barn i dubbelstorlekar (19-20, 21-22 osv till 33-34), vuxen i enkelstorlekar (35, 36 osv till 48).

Storlek:

Barn: 19-20, 21-22 osv till 33-34 (djup hälkopp)
Vuxen: 35, 36 osv till 48

Artikelnummer:

Barn: 792010-020, -022 osv till -034
Vuxen: 792010-035, -036 osv till -048

Kommer
vinter/vår
2023



PediEVA 45

Ett vitt inlägg i EVA-material med 45 Shore och bra medialt stöd. Grovslipad för att snabbt kunna anpassas. Kan täckas med microfiber. Säljs i par.

Storlek: 35-48

Artikelnummer: 792020-035, -036 osv till -048

Kommer
vinter/vår
2023



Multicolor lång, normal

Ett slipbart EVA-inlägg med olika färglager för enkel bedömning av slipningsnivå. 40 Shore. Säljs i par, i förpackning om två par.

Storlek: 35-48

Artikelnummer:

Med pelott: 373714-035, -036 osv till -048
Utan pelott: 373715-035, -036 osv till -048

INLÄGG



ReumaDiab PL763

Ett inlägg väl lämpat för diabetiker. Diapod-materialet har svamp- och bakteriedödande egenskaper. 25 Shore. Undersida av EVA-material dens 200, uppvärmsbart i 85°C -120°C. Säljs i par, i förpackning om två par. Jämna storlekar = lagervara, ojämna = beställningsvara.

Storlek: 35-47

Artikelnummer: 510763-034, -035 osv till -047



Soletta Modus

Inlägg för AKUT såravlastning. Moduler avlägsnas på inläggets undersida. 2 mm Diapod-material ovan, mellanlager av plastazote, undersida av fiberförstärkt EVA-material (ca 45 mm shore). Säljs per styck i förpackning om 2 st. Obs – neutral. Dubbelstorlekar (35-36, 37-38 osv till 47-48).

Storlek: 35-36, 37-38 osv till 47-48

Artikelnummer: 510345-035, -037 osv till -047



Infiniform, inlägg till Barn och Vuxna

Thermoplastiska carboninlägg CGC-matrix (par).

Storlek: **Tjocklek 1,8 mm:** **Tjocklek 2,4 mm:**

25-26	022098-000	022198-000
27-28	022099-000	022199-000
29-30	022100-000	022200-000
31-32	022101-000	022201-000
33-34	022102-000	022202-000
35-37	022103-000	022203-000
38-40	022104-000	022204-000
41-43	022105-000	022205-000
44-46	022106-000	022206-000



Escosoft blå diabetes

Ett brett inlägg med ljusblå PPT ovan, mellanlager av plastazote (ca 12 shore) och undersida av vit superform (ca 45 shore). Med pelott och THK-förstärkning. Säljs i par.

Storlek: 35-47

Artikelnummer: 816142-035, -036 osv till -047

MATERIAL




Infiniform Platta

Thermoplastiska carbonplattor.
CCC-matrix: carbon-carbon-carbon.
Mått 590 x 790 mm. Kan omformas vid temperatur min 90°C – max 240°C. Finns i två tjocklekar, 1,6 mm och 2,4 mm.

Artikelnummer:

1,6 mm: 022702-000

2,4 mm: 022704-000

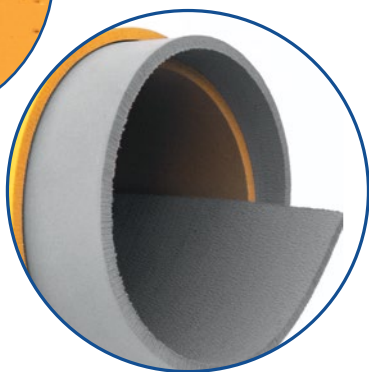

Diapod-material

Microperforerat täckmaterial för fotbäddar. Svamp- och bakteriedödande egenskaper. Formbart i temperaturer mellan 90°C – 120°C. Plattor om 0,75 kvm.

Färg / storlek:

Guld / 2 mm

Antracit / 2 mm, 4 mm

Artikelnummer:

511216-002

511224-002 / -004



Täckmaterial

Perforerad microfiber i stretch.
Färg mörkgrå, limsida ljusgrå.
Rulle a 25 m, bredd 14 cm.

Artikelnummer: 022016-014



Pelotter

Vi har flertalet olika pelotter, såväl neutrala som höger / vänster. Dessa är de vanligaste.

Storlek:

1 – hö/vä, säljs parvis

2 – hö/vä, säljs parvis

3 – njurformad, hö/vä, säljs parvis

Artikelnummer:

812041-001

812041-002

813435-003

För fullständigt sortiment – vänligen sök på www.erimed.se

MATERIAL



Kilformad inläggssula Wedge

0-10 mm. Dubbelstorlekar (36-37, 38-39 osv till 46-47).

Storlek: 36-37, 38-39 osv till 46-47

Artikelnummer: 810022-036, -038 osv till -046



Tvättbart skoöverdrag

Skoöverdrag lämpligt för post-op, gips och förbandsskor. Skyddar mot smuts och fukt. Ej vattentät. Sula i gummi, ovanmaterial i stretch-polyester. Tvättbart. 4 storlekar.

Skostorlek: Art.nr:

36-39 / S	635200-001
40-43 / M	635200-002
44-46 / L	635200-003
47-50 / XL	635200-004



Sko Caliper

Mätverktyg som möjliggör mätning av tjockleken i skor och höga kängor.

Artikelnummer: 760751-000

STRUMPOR

HeelPad

HeelPad är en behaglig komfortabel hälstrumpa med silikoninlägg för torr och sprucken hud. Vid kontakt med silikonet aktiveras hudens egna helningsprocess. Huden blir smidig och sprickorna försvinner utan användning av krämer. Kan bäras under vanliga strumpor, dag- eller nattetid. Max användning 12 timmar i sträck. Säljs i förpackning om 10 par.

Storlek / färg:

Medium / beige (ca 36-42)

Large / svart (ca 40-46)

Art.nr:

767100-000

767200-000



STRUMPOR



Diabetes-strumpa Normal (par)

Strumpa utan åtsittande resår och tjocka sömmar.
3 färger – vit, svart eller grå.

Skostorlek:	Vit, art.nr:	Svart, art.nr:	Grå, art.nr:
35-38	660001-112	660000-112	660000-312
39-42	660001-113	660000-113	660000-313
43-46	660001-114	660000-114	660000-314



Diabetes-strumpa Extra vid (par)

Extra vid strumpa utan åtsittande resår och tjocka sömmar. Upp till 60 cm omfång. Mycket lämplig för svullna/kraftiga fötter och fotleder. Finns i svart.

Skostorlek:	Art.nr:
35-38	663100-112
39-42	663100-113
43-46	663100-114



Diabetes-knäsocka Soft (par)

Knäsocka (60 cm) utan åtsittande resår och tjocka sömmar. Extra mjuk plysch i hela sockan. 2 färger – vit eller svart.

Skostorlek:	Vit, art.nr:	Svart, art.nr:
35-38	664001-312	664002-312
39-42	664001-313	664002-313
43-46	664001-314	664002-314



Soft: Insidan har extra mjuk plysch.



Diabetes-strumpa Soft (par)

Strumpa utan åtsittande resår och tjocka sömmar. Extra mjuk halvplysch under foten, över tårna och runt hälen. 3 färger – vit, svart eller grå.

Skostorlek:	Vit, art.nr:	Svart, art.nr:	Grå, art.nr:
35-38	662001-112	662000-112	662000-312
39-42	662001-113	662000-113	662000-313
43-46	662001-114	662000-114	662000-314

STRUMPOR



Ortos-strumpa i bomullsfrotté KAFO (styck)

70 cm lång strumpa med häl.
2 färger – vit eller svart.

Skostorlek:	Vit, art.nr:	Svart, art.nr:
35-38	665001-312	665000-312
39-42	665001-313	665000-313
43-46	665001-314	665000-314



Ortos-strumpa i CoolMax 2 ply KAFO (styck)

Strumpa i 2 längder och bredder, utan häl.
2 färger – vit eller svart. ROBS-01-24, ROBS-12-28

Storlek / Längd:	Vit, art.nr:	Svart, art.nr:
Small / 90 cm	617018-000	617018-001
Medium / 100 cm	619520-000	619520-001



Ortos-strumpa i CoolMax 2 ply, lämplig för lång AFO eller KAFO (styck)

Strumpa i 2 längder och bredder, utan häl. 2 färger – vit eller svart. ROBS-01-16/20, ROBS-12-16/20

Storlek / Längd:	Vit, art.nr:	Svart, art.nr:
Small / 50 cm	615516-000	615516-001
Medium / 50 cm	617020-000	617020-001
Small / 70 cm	615520-000	615520-001
Medium / 70 cm	619518-000	619518-001

CoolMax är ett material som snabbt flyttar svett från huden till utsidan av tyget och bidrar till att huden känns torr och komfortabel.

STRUMPOR



Ortos-tåstrumpa i CoolMax 2 ply (styck)

Tåstrumpa för barn/dam i vit, utan häl. TOE-SM/MD/LG-16

Storlek / Längd: Art.nr:

Small / 20 cm	610000-001
Medium / 42 cm	610000-002
Large / 42 cm	610000-003



Ortos-strumpa barn i CoolMax 1 ply (styck)

Strumpa utan häl. 2 färger – vit eller svart. Finns i tre längder. RK1P-04/08/14

Storlek / Längd: Vit, art.nr: Svart, art.nr:

X-Small / 10 cm	611200-010	
X-Small / 20 cm	611200-020	611200-021
X-Small / 40 cm	611200-040	611200-041



Ortos-strumpa barn i CoolMax 2 ply (styck)

Strumpa i 2 längder, utan häl. 2 färger – vit eller svart. RKDF-OA-08, ROBS-OA-14

Storlek / Längd: Vit, art.nr: Svart, art.nr:

X-Small / 20 cm	614008-000	614008-001
X-Small / 40 cm	614013-000	614013-001



CoolMax är ett material som snabbt flyttar svett från huden till utsidan av tyget och bidrar till att huden känns torr och komfortabel.

Vi vill ge alla människor med funktionsvariationer ett optimalt liv.

I denna broschyr presenterar vi delar av vårt sortiment med inlägg, material och strumpor.

På vår hemsida **www.erimed.se** återfinner ni många fler fina produkter såsom skor, proteser, ortoser, textilier med mera.



www.erimed.se



Ellipsvägen 11
141 75 Kungens Kurva
Phone: +46 (0)8 - 449 56 50
Email: info@erimed.se

Grafisk design och tryck: ClearDesign.se
Omslag: wavebreakmedia, Shutterstock

