

2025
2026

PROTES OCH ORTOS





Vårt syfte – det som motiverar oss, ger vägledning och skapar mening.

Att möjliggöra för alla människor med funktionsvariationer att leva ett optimalt liv är något som varit Erimed's vision ända sedan starten på 1980-talet. Denna grundläggande och starka drivkraft är något som genomsyrar vår verksamhet än i dag, och vi fortsätter envetet att utveckla innovativa lösningar och samarbeta med tillverkare och kunder för att ta fram produkter som bidrar till att möjliggöra för barn och vuxna att kunna leva det liv de vill.

I denna katalog presenterar vi delar av vårt sortiment gällande protes och ortos för vuxna och barn. Vi har delat upp katalogen efter Protes och Ortos.

Huvuddelen av alla protes- och ortosprodukter i katalogen är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordningen 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).

I katalogen presenterar vi de vanligaste av våra produkter och du finner komplett sortiment på vår hemsida, där möjligheten att välja annat språk också ges. I katalogen finns både lagerförda produkter och beställningsvaror. Gällande beställningsvaror är leveranstiden ca 1-2 veckor, och det är även viktigt att känna till att beställningsvaror normalt inte kan returneras. Vid orderbekräftelse meddelas om en vara är beställningsvara.

Då vårt sortiment förändras från tid till annan kan vi ej garantera att samtliga produkter överensstämmer med dagssituationen. För en uppdatering gällande hela vårt sortiment rekommenderar vi att ni besöker www.erimed.se eller kontaktar oss på order@erimed.se alternativt **Tel: +46 8 449 56 50**.

Symbolförklaring



Saltvattentålig



Sötvattentålig

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.

Huvudsakliga varumärken i denna broschyr.



Dictus-bandet är känt för att i många år har hjälpt brukare med droppfot tillbaka till ett aktivt liv. Bandet lyfter foten direkt efter toe-off, vilket gör att trösklar, mattkanter och ojämna underlag inte längre utgör ett hinder. Samtliga Dictus-modeller i Dictus-familjen är CE-märkta enligt den medicintekniska förordningen MDR (Klass 1).



Amparo - Innovativ teknologi som revolutionerar protes-tillpassningen.

Amparo erbjuder ett användarcentrerat proteshylssystem som utformats för att gynna såväl amputerade som ortopedingenjörer. Med en smart "off the shelf" protesteknik möjliggör det för ingenjörerna att tillhandahålla effektiva och mobila protestjänster med lättanvända och högkvalitativa produkter. Brukaren kan med Amparos teknik gå hem med sin nya protes direkt vid första besöket, och proteshylsan kan omformas vid volym-förändringar och därmed återanvändas.



College Park är kända för sin teknik, innovation och skapandet av nya protesprodukter som ger maximal funktion för amputerade i alla åldrar och till alla aktivitetsnivåer.

College Park har kommit långt inom protesdesign och jobbar mycket med materialen: Intelliweave®-kompositer och iST™ (Integrated Spring Technology).

För proteser behövs ofta detaljerade beställningsunderlag. Dessa finns att tillgå på vår hemsida under respektive produkt.



Wagner Polymertechnik GmbH är kända protesprodukt-tillverkare sedan 2001. Wagner tillverkar produkter så som moduler och liners som gör protesanpassningen lättare för handläggaren och god komfort för brukaren.



Trulife är kända för sina högkvalitativa produkter inom protes. Det är ett globalt företag med 60 års erfarenhet inom ortopedteknik. De jobbar hela tiden efter att hitta bästa lösningen för brukaren och god säkerhet.

För proteser behövs ofta detaljerade beställningsunderlag. Dessa finns att tillgå på vår hemsida under respektive produkt.



Alps är kända liners-/sleeve-tillverkare. De har stor passion för innovation och utveckling av sina produkter för att kunna möta ortopedingenjörers och brukares behov med slogan: "Making Lives Better".

I katalogen återfinns även protes-och ortosrelaterade produkter av andra varumärken.

Innehållsförteckning.

PROTES.....	6	Amparo	24
Fötter.....	6	<i>Resilience Socket.....</i>	24
<i>Låg-/medelaktiv (K2-K3)</i>	6	Resilience Socket Medium	24
Breeze	6	Resilience Socket Small.....	25
Celsus	6	Resilience Socket Pediatric.....	25
Odyssey K2	7	<i>Confidence Socket</i>	26
Tribute	7	Confidence Socket Small och Large	26
Terrain IW	8	<i>Trust Socket</i>	27
Seattle Light Foot	8	Trust Socket	27
Zumo	9	<i>Utrustning för hylstillverkning</i>	28
<i>Medel-/högaktiv (K3-K4)</i>	9	Amparo Verktygsset	28
Seattle Solas Foot	9	Liner	29
Seattle Skride Foot.....	10	<i>Gel.....</i>	29
Odyssey K3	10	Lite Excelsior Liner	29
Trustep	11	Lite GEL Liner.....	30
Terrain	11	Lite GEL TF Transfemoral	31
Venture	12	Smart Seal Liner.....	31
Soleus	12	UltraSeal Liner	32
Orbit.....	13	Anterior Posterior Liner	32
Aviator	13	ProFit Liner	33
Voyager	14	Easy Liner	34
<i>Special</i>	14	Easy Liner Super Stretch	35
Odyssey IQ – Mikroprocessorfot	14	<i>Silikon.....</i>	35
Accent – Ställbar klackhöjd	15	Lite Dummy Liner	35
Celsus IVT – Vakuumfot	15	Lite Arm Liner	36
Sidekicks	16	SoftSil Liner	36
<i>Barn.....</i>	16	LITE Liner Silikon SkinTEX 2 SOFT	37
Child's Play Energy Foot	16	LITE Liner Silikon SkinTEX 6 SOFT	37
Truper	17	Sleeve	38
Scout	18	Lite Sleeve.....	38
Knä/Höft.....	19	I-Sleeve	39
<i>Lågaktiv</i>	19	Easy Sleeve	39
A6 Knäled med lås och framkastare	19	Easy Sleeve Super Stretch	40
Aura	19	Reinforced Flex Sleeve	40
Guardian Broms-knä	20	Flex Sleeve.....	41
Fyraxlad knäled med två lägen	20	Seamless Suspension Gel Sleeve	41
Badknäled	20	Adaptrar	42
<i>Medel-/högaktiv</i>	21	<i>Barn 22 mm.....</i>	42
Icon – mikroprocessorknä	21	Dubbeladapter	42
Capital Hydraulic knee	21	Röradapter	42
Victor	22	Hylsadapter hona	42
SSK615	22	Lamineringsadapter.....	42
Pneumatisk fyraxlad knäled	22	Pyramidhona med rör.....	42
Swan100 Multi axial bouncing.....	23	Hylsblock i plast.....	42
<i>Barn.....</i>	23	4-Öronadapter kort.....	43
Barn Knäled.....	23	Hylsadapter roterbar hona.....	43
<i>Höft.....</i>	23	Pyramidhona med rör.....	43
Höftled Fyraxlad H2.....	23	4-hålsadapter hane	43

Hylsadapter roterbar hane.....	43	Kosmetikstrumpa	53
Dubbeladapter roterbar hona	43	Kosmetikstrumpa Underben.....	53
Röradapter	43	Kosmetikstrumpa Lårben	53
<i>Röradapter, rör och rör med adapter</i>		Kosmetikstrumpa Barn	53
30 mm	44	<i>Övriga strumpor</i>	54
Clamp adapter.....	44	Tensitube Stumpkrympare.....	54
Pyramidhona	44	Byxa för höftex	54
Rör AL.....	44	<i>Trikåslang</i>	54
Bonded Pylon, 16 Inch	44	Trikåslang – Bomull	54
Pyramidhona med rör.....	44	Cupping Tube	54
<i>Hylsadapter</i>	45	Supertunn Nylonslang	55
3-Armsrotation adapter.....	45	Övrigt	55
4 Öronadapter	45	Pådragspåse – Donning Aid.....	55
<i>4-Hålsadapter</i>	45	Lite Vacuum Ring	55
Base plate	45		
Splined 4-hole rotatable adapter	45		
<i>Rotations- & förskjutningsadapter</i>	45		
Dubbelhon/han adapter.....	45		
Dubbelhona-adapter.....	45		
Dubbelhona justerbar höjd adapter	46		
3 Armsrotation/förskjutadapter hona	46		
Förskjutningsadapter hane.....	46		
Förskjutnings-/rotationsadapter	46		
Förskjutningsadapter.....	46		
Förskjutningsadapter hona	46		
<i>Flexionsplatta</i>	47		
Flexionsplatta 10° Hona	47		
Flexionsplatta 10°	47		
<i>Specialadapter</i>	47		
Badankel ledad.....	47		
Ventiler/Låssystem	48		
<i>Ventiler</i>	48		
Backventil med gummitätning	48		
Backventil med gänga	48		
Mini-Hyls ventil	48		
Liten ventil för laminering	48		
<i>Låssystem</i>	48		
Snörlås för underben.....	48		
Snörlås för lårben	48		
Kosmetik	49		
Kosmetik (PUR).....	49		
Underbenskosmetik (PUR).....	49		
Underbenskosmetik (PE)	49		
New IDIA – Snabbkosmetik	49		
Protesstrumpor	50		
<i>Stumpstrumpa</i>	50		
Stumpstrumpa – Bomullsfrötté	50		
Stumpstrumpa – Tunn Bomull	50		
Stumpstrumpa – Partiell Volymkontroll..	51		
Stumpstrumpa – Nylon	51		
Stumpstrumpa – CoolMax	52		
Stumpstrumpa Open Toe – CoolMax ..	52		

ORTOSER.....56

Höft.....56

Dictus Hip.....56

Dictus Hip-Knee 56 |

Dictus Hip-Foot.....57

Ankel.....58

Dictus Droppfotsortos.....58

Dictus Original 58 |

Dictus Flex.....59

Dictus Indoor 59 |

Droppfotsortoser

PregFIX® AFO Anterior EasyFit 60 |

Easy Walk Advance II 60 |

AFO PP-Skena 61 |

AF Servo 61 |

Viloortoser

UFO – Viloortos 62 |

Multipodus – Viloortos 62 |

Textilier

Ortos-strumpor

Ortos-strumpa KAFO – Bomull..... 63 |

Ortos-strumpa KAFO – CoolMax 2 ply .. 63 |

Ortos-strumpa AFO/KAFO

– CoolMax 2 ply..... 64 |

Ortos-strumpa Barn – CoolMax 1 ply 64 |

Ortos-strumpa Barn – CoolMax 2 ply 65 |

Tåstrumpa 2 ply..... 65 |

T-shirt/Linnen.....

Korsettlinne – V-Ringad..... 66 |

Korsettlinne – Axilla Flaps 66 |


Korsett T-shirt 67 |

Erimed Protes och Ortos | För mer information och komplett sortiment se: erimed.se | order@erimed.se | +46 (0)8 449 56 50

5

Låg-/medelaktiv (K2-K3)

Breeze

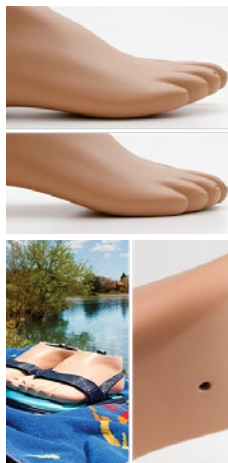

Artikelnummer

761920-1XX Höger
761920-0XX Vänster


Egenskaper

- Lågaktiv nivå (K2)
- Storlek 21-30 cm
- Bygghöjd
 - 21-25 cm: 6,2 cm
 - 26-30 cm: 6,5 cm
- Vikt 523 g
- Max patientvikt
 - 21-25 cm: 100 kg
 - 26-30 cm: 125 kg
- Saltvattentålig
- Kolfiberfoten är möjlig att använda som hygienfot, borra då upp ett 6 mm hål i kosmetiken på markerat ställe.

Om produkten

Protesfoten Breeze använder avancerad teknik och har en mängd olika funktioner som gör att den sticker ut från mängden. Det vattenvänliga systemet har en valfri vattenavloppsport, korrosionsbeständiga material och speciella modifieringar för att rena vatten från hela protessystemet. EnviroShell är berikad med UV-hämmare och rent silver plus att den är byggd med ett speciellt tå-lyft för att få lättare avrullning i gången. Breeze-foten ger verkligen en komplett lösning. Kosmetiken finns i olika nyanser.

Celsus

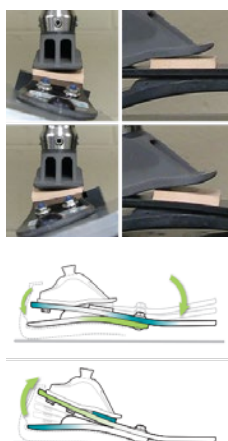

Artikelnummer

761450-1XX Höger
761450-0XX Vänster

Egenskaper

- Lågaktiv nivå (K2)
- Storlek 21-30 cm
- Max patientvikt
 - 21-24 cm: 100 kg
 - 25-30 cm: 136 kg
- Bygghöjd 6,4 cm
- Fotens vikt 526 g

Om produkten

Celsus kombinerar College Parks innovativa integrerade fjäderteknik (iST) med en design som ger lägre belastning. Foten har en aktiv häl, god markkontakt och naturlig rörelse för att ge smidiga, stabila övergångar. Celsus är hållbar men ändå lätt och erbjuder en multi-axiell rörelse för patienter på lågaktiv nivå. Fotkosmetiken har sandal-tå och finns i olika färgnyanser.

Odyssey K2



Artikelnummer

762900-1XX Höger
762900-0XX Vänster


Egenskaper

- Lågaktiv nivå (K2)
- Storlek 21-30 cm
- Max patientvikt
 - 21-25 cm: 100 kg
 - 26-30 cm: 136 kg
- Bygghöjd 7,8-8,3 cm
- Fotens vikt 744 g

Om produkten

Hydrauliska fötter kan ge K2-patienter ett otroligt kontrollerat rörelseomfång samt hjälpa till med kraftabsorption. Det ger också patienten möjlighet att hålla foten platt och stadigt mot marken med en smidig övergång från sittande till stående, för ett bekvämt och naturligt utseende. Odyssey K2-foten från College Park har en patenterad böjd hydraulisk fotled, Intelliweave™-kompositfotbas och anpassningsbar dubbel StrideControl™. Denna revolutionerande fot ger ett mycket bra rörelseomfång i en lätt och lågprofilerad design för en oslagbar kombination av K2-patientfördelar. Kosmetik i olika nyanser och med sandal-tå.

Tribute

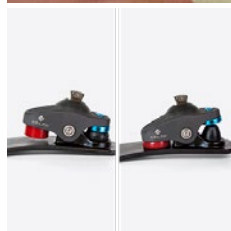

Artikelnummer

761500-1XX Höger
761500-0XX Vänster

Egenskaper

- Låg-/medelaktiv nivå (K2-K3)
- Tri-axialt rörelseomfång
- Storlek 21-30 cm
- Max patientvikt 100 kg
- Bygghöjd 6,1 cm
- Fotens vikt 502 g

Om produkten

Tribute levererar pålitlig prestanda i ett prisvärt paket med en tri-axial design och Intelliweave®-kompositteknik. Protesfoten är av lätt vikt och med ett fotblad av full längd. Den perfekta foten för varierat gångunderlag och tri-axiellt rörelseomfång. Tribute är en idealisk lösning för förstagångs användare och användare med låg till måttlig aktivitetsnivå. Foten kan enkelt individanpassas med hjälp av utbytbara bumpers. Fotkosmetiken är med sandal-tå och finns i två bredder och olika färgnyanser. Dessa val görs vid beställning.

Terrain IW



Artikelnummer

763200-1XX Höger
763200-0XX Vänster

Egenskaper

- Låg-/medelaktiv nivå (K2-K3)
- Storlek 21-30 cm
- Tri-axial rörelse, IW Intelliweave glasfiberfotblad
- Max patientvikt
 - 21-24 cm: 100 kg
 - 25-30 cm: 136 kg
- Bygghöjd
 - 21-24 cm: 6,4 cm
 - 25-26 cm: 6,9 cm
 - 27-30 cm: 7,1 cm
- Fotens vikt 645 g
- Sötvattentålig

Om produkten

Med fokus på K2-användare med låg belastning kombinerar College Park några av sina mest populära och pålitliga teknologier i Terrain iW. Denna lätta fot erbjuder tri-axial rörelse på ett fotblad av Intelliweave-komposit. Med anatomisk fotledsrörelse, flexibla fjädrar och en slitstark permanent häl-kil är Terrain IW designad för komfort och stabilitet i vardagen.

Seattle Light Foot



Artikelnummer

650135-1XX Höger
650135-0XX Vänster

Egenskaper

- Medelaktiv nivå (K3)
- Storlek 22-29 cm
- Max patientvikt 136 kg
- Bygghöjd 9 cm
- Fotens vikt 480 g
- Klackhöjd 10 mm

Om produkten

En lämplig fot till brukare på alla nivåer. Protesfoten är lätt med en snygg design som anländer redo att installeras. Kosmetiken har sandal-tå och fotskalet går ej att ta av. Light foot är förmonterad med en pyramid för snabb installation, pyramid och distans kan tas bort för symes nivå.

Tillbehör

Artikelnummer	Produkt	Storlek
650300-000	Symes Nut	22-29 cm
653300-000	Laminating Core	22-29 cm
650210-000	Spacer	22-29 cm
650240-000	Fotpyramid Titan	
650542-000	Bolt Kit	

Zumo

**Artikelnummer** (SZM45)

650159-1XX Höger
650159-0XX Vänster

Egenskaper

- Medelaktiv nivå (K3)
- Storlek 25-30 cm
- Bygghöjd 10 cm
- Klackhöjd 9,5 mm
- Vikt: 750 g
- Max patientvikt 205 kg

Om produkten

Den robusta och stabila protesfoten Zumo klarar en vikt på 200 kg. Protesfoten är tillverkad i hållbar kompositdesign och rekommenderas för de medelaktiva användarna. Fotbladet har en delad tå-form för ökad stabilitet, tån är också dynamisk och hälen erbjuder god dämpning för bekväm gång. Zumo levereras förmonterad med hanpyramid för snabb och enkel installation. Kosmetiken med sandal-tå är avtagbar och erbjuds i två färgnyanser.

Medel-/högaktiv (K3-K4)

Seattle Solas Foot

**Artikelnummer** (SLS49)

650149-1XX Höger
650149-0XX Vänster

Egenskaper

- Medel-/högaktiv nivå (K3-K4)
- Storlek 22-30 cm
- Max patientvikt 160 kg
- Bygghöjd 18 cm
- Fotens vikt 670 g
- Klackhöjd 9,5 mm

Om produkten

Främjar en mjuk plantarflexion och ger jämn kontrollerad energiåtergivning genom gångcykeln. Solas är slitålig och godkänd för brukare med en vikt upp till 160 kg. Protesfoten har ett tvådelat kompositfotblad i full längd som ger viss **rotationsmöjlighet** och därmed bättre stabilitet i ojämn terräng. Solas levereras med den erkänt snygga Seattle-kosmetiken.

Seattle Skride Foot



Artikelnummer (SSF40)

650140-1XX Höger
650140-0XX Vänster

Egenskaper

- Medel-/högtaktiv nivå (K3-K4)
- Torsion +/- 14°
- Stötdämpning upp till 15 mm
- Storlek 22-30 cm
- Max patientvikt 150 kg
- Bygghöjd 19,5 cm
- Fotens vikt 937 g
- Klackhöjd 9,5 mm
- Sandal-tå

Om produkten

Kombinerar det bästa av tre världar: energilagring, stötdämpning och torsion. Allt för att möta kraven från aktiva brukare som vill ha både god komfort och hög grad av energiåtergivning.

Skride levereras med den omtyckta Seattle-kosmetiken och det går att välja mellan två färger, ljus och mörk.

Odyssey K3



Artikelnummer

762903-1XX Höger
762903-0XX Vänster

Egenskaper

- Medelaktiv nivå (K3)
- Storlek 21-30 cm
- Max patientvikt 125 kg
- Bygghöjd 7,5-7,7 cm
- Fotens vikt 750 g
- Sötvattentålig

Om produkten

Odyssey K3 bygger på framgången med den populära Odyssey K2 och kan ge otrolig markkontakt för högre aktivitet. Denna fot har vår patenterade böjda hydrauliska fotled och en fotbas i högfrekvent kolfiber för ökad dynamisk respons. Den robusta fotleden och den vinklade positioneringen är utformade för användare på medelaktiv nivå. Kombinationen av smidig hydraulik och en hållbar fotplatta kan ge exceptionell prestanda under aktiviteter som stadsvandring eller vandring på olika kuperade underlag. Kosmetiken har sandal-tå och finns i ett flertal olika färgnyanser.

Trustep



Artikelnummer

761100-1XX Höger
761100-0XX Vänster

Egenskaper

- Medel-/högaktiv nivå (K3-K4)
- Storlek 22-31 cm
- Klackhöjd 13 mm
- Max patientvikt
 - IP: 136 kg
 - UA: 160 kg
- Bygghöjd
 - IP: 8,7 cm
 - UA: 15,2 cm
- Fotens vikt 678 g
- Välj mellan integrerad pyramid (IP) eller universal ankel (UA)

Om produkten

Trustep är en unik och oöverträffad protesfot som sätter standarden för komfort och en naturlig rörlighetskänsla. Den var den första som gav korrekt rörelse i alla plan, vilket möjliggjorde nästan samma vertikala rörelse, rotation och stabilitet som en anatomisk fot. Med ett komplett utbud av alternativ möjliggör den mångsidiga designen fullständig anpassning. Trustep är lätt att individanpassa tack vare sin flexibla design och de utbytbara gummialternativen. Kosmetiken erbjuds i flera olika färgnyanser samt två olika bredder. Valen görs vid beställning.

Terrain



Artikelnummer

763100-1XX Höger
763100-0XX Vänster


Egenskaper

- Medel-/högaktiv nivå (K3-K4)
- Storlek 21-30 cm
- Tri-axialt rörelseomfång
- Max patientvikt 166 kg för de större storlekarna, annars 150 kg
- Bygghöjd
 - 21-25 cm: 8,6 cm
 - 26-30 cm: 9 cm
- Fotens vikt 815 g
- Hålkils-kit medföljer
- Saltvattentålig

Om produkten

Promenera bekvämt på livets guppiga vägar. Terrain-foten skapades för att uppnå anatomisk fotledsrörelse och energiåtergivning i en lågprofil design. College Park använder sin tri-axiala teknikexpertis på ett nytt sätt. Terrain är mångsidig och servicefri, samt har en kolfiberbas och permanenta stötdämpare inuti fotleds-höljet för en progressiv, bekväm respons under aktiviteter med låg till hög belastning. Kosmetiken har sandal-tå och finns i flera olika färgnyanser, valet görs vid beställning.

Venture

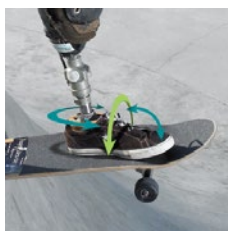

Artikelnummer

761300-1XX Höger
761300-0XX Vänster

Egenskaper


- Medel-/högaktiv nivå (K3-K4)
- Storlek 21-30 cm
- Tri-axialt rörelseomfång
- Max patientvikt
 - 21-24 cm: 113 kg
 - 25-30 cm: 125 kg
- Bygghöjd 6,4-6,9 cm
- Fotens vikt 585 g

Om produkten

Protesfoten Venture erbjuder en blandning av energilagring och rörlighet. Foten passar till medel- och högaktiva brukare. Energilagring – fotbladet av Intelliweave-komposit sträcker sig hela vägen från häl till tå-parti, ankelns fästpunkter ger fotbladet lång momentarm för bästa flexibilitet.

Rörlighet – ankeln ger foten ett normalt rörelseomfång och möjlighet till individanpassning finns eftersom du kan byta till mjukare respektive hårdare bumpers. Kosmetiken finns i ett flertal färgnyanser och i två olika bredder, smal och bred. Valen görs vid beställning.

Soleus

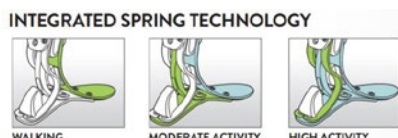

Artikelnummer

761900-1XX Höger
761900-0XX Vänster

Egenskaper

- Medel-/högaktiv nivå (K3-K4)
- Storlek 21-30 cm
- Fotens vikt 667 g
- Multipla fjäderelement samverkar för att ge en sömlös övergång från hälsättning till toe-off
- Polycentrisk ankeldesign ger överlägsen stäfas-kontroll
- Inbyggd vertikal stötdämpning
- Saltvattentålig

Fotstorlek	Max vikt	Bygghöjd
21-24 cm	100 kg	16,3 cm
25-26 cm	113 kg	18 cm
27-30 cm	125 kg	19,3 cm

Om produkten

Soleus är den första protesfoten med integrerad fjäderteknik (iST®) och är byggd för att ge naturlig rörelse med en progressiv, 3-stepsrespons och överlägsen rörelseomfång. Foten integrerar Intelliweave-kompositfjädrar genom ett robust, flexibelt plantarbälte som reagerar på varierande stötar. Den unika, skalade designen ger också 10 mm vertikal stötdämpning för ökad följsamhet och komfort. Soleus passar en måttligt aktiv livsstil upp till paralympiska idrottare med hög belastning. Kosmetiken finns i flera olika färgnyanser och två olika bredder, smal och bred. Vid beställning görs dessa val samt val av hårdheten på protesfoten, se beställningsformulär på erimed.se

Orbit



Artikelnummer

762150-1XX Höger
762150-0XX Vänster

Egenskaper

- Medel-/högaktiv nivå (K3-K4)
- Torsion +/- 20°
- Storlek 21-30 cm
- Max patientvikt 150 kg
- Bygghöjd
 - 21-25 cm: 9,3 cm
 - 26-30 cm: 9,8 cm
- Fotens vikt 895 g
- Sötvattentålig

Om produkten

Protesfoten Orbit är designad för att ge smidig rotation och energi i gången. College Parks unika, inbyggda torsions-funktion har integrerad energiåterföring, vilket kan förbättra komforten för golf, baseboll, tennis med mera! Den slitstarka Orbit-foten erbjuder en otroligt låg profil och ett totalt rörelseomfång på 40°. Trögheten på torsionen kan lätt ändras med en 4 mm insexnyckel. Protesfoten innehåller också College Parks kolfiberkomposit i en kolfiberdesign, vilket bidrar till en dynamisk respons under aktiviteter med låg till hög belastning. Fotkosmetiken med sandal-tå erbjuds i flera olika färgnyanser som väljs vid beställning.

Aviator



Artikelnummer

762120-1XX Höger
762120-0XX Vänster

Egenskaper

- Medel-/högaktiv nivå (K3-K4)
- Stötdämpning upp till 10 mm
- Energiåtergivning två 97 %
- Energiåtergivning häl 93 %
- Storlek 21-30 cm
- Max patientvikt
 - 21-25 cm: 125 kg
 - 26-30 cm: 150 kg
- Bygghöjd 16,4 cm
- Fotens vikt 979 g
- Hålkils-kit medföljer
- Sötvattentålig

Om produkten

Den lätta foten Aviator är utformad för att ge hög energiåtergivning, komfort och vertikal stötdämpning i varje steg. Genom att kombinera flexibla Intelliweave®-komposit med dynamisk kolfiber använder den eleganta protesfoten ett hybridmaterial i sina fjädrar. Dessa funktioner erbjuder överlägset rörelseomfång för att passa ett brett utbud av aktiviteter och användare. Fotkosmetiken har sandal-tå och finns i ett flertal färgnyanser som bestäms vid beställning.

Voyager

college park



Artikelnummer

762100-1XX Höger
762100-0XX Vänster

Egenskaper

- Medel-/högaktiv nivå (K3-K4)
- Torsion +/- 20°
- Stötdämpning upp till 10 mm
- Energiåtergivning tå 97%
- Energiåtergivning häl 93%
- Storlek 21-30 cm
- Max patientvikt 150 kg
- Bygghöjd 19,1 cm
- Fotens vikt 1174 g
- Sötvattentålig

Om produkten

Protesfoten Voyager är designad för att uppnå ultimat komfort och rotation för alla tillfällen. Med vertikal stötdämpning, energilagrande fjädrar och inbyggd torsion känns denna högpresterande fot mer naturlig för användaren. Det mycket goda rörelseomfånget tillgodoser olika aktivitetsnivåer. Vid tillverkningen av Voyager används en hybridmaterialmetod – en blandning av flexibla Intelliweave®-kompositer med slitstark kolfiber för att maximera funktionen. Fotkosmetiken har sandal-tå och finns i ett flertal färgnyanser, valet görs vid beställning.

Special

Odyssey IQ – Mikroprocessorfot

college park



Artikelnummer

762904-1XX Höger
762904-0XX Vänster

Egenskaper

- Låg-/medel, högaktiv nivå (K2-K4)
- Hydrauliskt rörelseomfång 2,5°-9,5°
- Storlek 23-30 cm
- Bygghöjd 8,8-9 cm
- Vikt: 1027 g
- Max patientvikt 125 kg
- Sötvattentålig (IP67 klassning)

Om produkten

Den nya Odyssey® iQ är en hydrauliskt dämpad mikroprocessorfot som är lätt och otroligt lågprofilerad. Med IP67-klassning, batteri med lång livslängd och snabba svarstider passar den en mängd olika användare och aktiviteter. Den har också en enkel installation och en unik metod för fjäderassisterad dorsalflexion.

Användarvänlig

Mikroprocessorfoten Odyssey IQ skapades för att minska mental och fysisk stress för användaren. Med dess sensorer, den enkla Stride Studio-appen och genomtänkta design låter denna fot användaren rikta sitt fokus mot bättre saker.

Accent – Ställbar klackhöjd



Artikelnummer

761600-1XX Höger
761600-0XX Vänster

Egenskaper

- Låg-/medelaktiv nivå (K2-K3)
- Justerbar 51 mm
- Storlek 21-28 cm
- Bygghöjd Pyramid (IP) 8,5-9,9 cm
- Bygghöjd Dynamisk pylon (DP) 19,8-21,5 cm
- Vikt (IP) 608 g
- Vikt (DP) 761 g
- Max patientvikt
 - 21-24 cm: 100 kg
 - 25-28 cm: 113 kg

Om produkten

Accent erbjuder justering av klackhöjden på 5 cm med ett enkelt knapptryck, foten erbjuder 13 olika lägen att välja mellan. Protesfoten har en mjuk fotledskåpa som låses fast i fotkosmetiken som då förhindrar att kosmetiken blir bucklig vid justering av klackhöjden. Accent erbjuder ett servicefritt alternativ för personer som önskar en kosmetiskt tilltalande fot med flexibilitet i vardagen. Fotkosmetiken har sandal-tå, finns i två bredder smal och bred samt erbjuder två olika färgnyanser, valet görs vid beställning.

Celsus IVT – Vakuumfot



Artikelnummer

761451-1XX Höger
761451-0XX Vänster

Egenskaper

- Lågaktiv nivå (K2)
- Avtagbart fot-skål med sandal-tå
- Pump placerad vid foten
- Storlek 21-30 cm
- Bygghöjd 5,5-6,6 cm
- Vikt 652 g
- Max patientvikt
 - 21-24 cm: 100 kg
 - 25-30 cm: 136 kg

Om produkten

En lämplig protesfot för lågaktiva brukare (K2). Vakuumsystemet ger möjligheten att minska volymskillnader och pistongeffekter i hylsan. Med förbättrad fjädring till stumpen kan den här lågprofil-foten förbättra komforten och stumpens hälsa. Celsus integrerad vakuumteknologi (iVT) har också Integrated Spring Technology (iST®) och Intelliweave®-kompositer för att ge god energi, styrka och flexibilitet i gången. Protesfoten är designad för att uppnå 20 inHg på bara några få steg, vilket gör att patienten mer effektivt uppnår vakuum.

Sidekicks




Artikelnummer

766500-000 1 st
766500-001 1 par

Egenskaper

- Lågaktiv nivå (K2)
- Max patientvikt: 125 kg
- Bygghöjd 5,84 cm
- Fotens vikt 422 g
- Bumpers-kit medföljer
- Saltvattentålig

Om produkten

Sidekicks®, de första justerbara kortfötterna för förkortade proteser. Med naturlig anatomisk fotledsrörelse och en flexibel plattform är de en stor förbättring jämfört med tidigare alternativ för bilaterala, transfemorala amputerade. Protesfoten är gångepassad och godkänd för vattenanvändning och ojämnt underlag, erbjuder dorsal- och plantarflexion samt inversion och eversion i den vardagliga miljön för ultimat balans och stabilitet.

Barn

Child's Play Energy Foot




Artikelnummer

650133-1XX Höger
650133-0XX Vänster

Egenskaper

- Medel-/högaktiv nivå (K3-K4)
- Storlek 13-21 cm
- Max patientvikt 65 kg
- Bygghöjd 4-4,5 cm
- Fotens vikt 150 g

Om produkten

En protesfot med dynamisk tå och dämpning i häl. Fotskalet har sandal-tå och finns två olika färgnyanser. Fotskalet kan ej tas av på storlekarna 16-21 cm.

Tillbehör

Artikelnummer	Produkt	Storlek
650301-000	Symes Nut	13-15 cm
650302-000	Symes Nut	16-18 cm
650303-000	Symes Nut	19-21 cm
650241-000	Spacer	13-15 cm
650243-000	Spacer	16-18 cm
650245-000	Spacer	19-21 cm
653301-000 (SLC301)	Laminating Core	13-15 cm
653302-000 (SLC302)	Laminating Core	16-18 cm
653303-000 (SLC303)	Laminating Core	19-21 cm
650314-000 (SAB314)	Energy Ankle Block	13-15 cm
650315-000 (SAB315)	Energy Ankle Block	16-18 cm
650316-000 (SAB316)	Energy Ankle Block	19-21 cm
650003-285 (AAAK285)	Fotpyramid barn	
650003-009 (AAAKSMP)	Childs play socket mounting plate	

Truper



Artikelnummer

(IP) 761200-1XX Höger
 (IP) 761200-0XX Vänster
 (ALX) 761250-1XX Höger
 (ALX) 761250-0XX Vänster

Egenskaper

- Låg-/medel-/högaktiv nivå (K2-K4)
- Storlek 16-21 cm
- Max patientvikt
 - 16-18 cm: 45 kg
 - 19-21 cm: 60 kg
- Bygghöjd
 - (IP): 5,3-6,1 cm
 - (ALX): 11-11,8 cm
- Fotens vikt 215-314 g

Om produkten

Den robusta Truper-foten kombinerar hög energi med stabilitet för aktiva barn. Fotens flexibla framfot och stötdämpning är byggda för att lagra energi för en smidig och kontrollerad övergång från stående till löpning. Truper är tillverkade för att enkelt kunna justeras för växande barn och finns i två storleksspann som ger flexibilitet genom tonåren. Protesfoten kan individanpassas med hjälp av bumpers och växtplattor i takt med att barnet växer. Fotkosmetiken har sandal-tå och finns i flera färgnyanser. Val av adapter, hårdhet, storlek och färg görs vid beställning, beställningsformulär hittas på erimed.se

Tillbehör

Art.nr. Vänster	Art.nr. Höger	Produkt	Storlek
761618-200	761618-210	Growth Plate Kit	16-18 cm
761921-200	761921-210	Growth Plate Kit	19-21 cm
761618-300	761618-310	EXO Block Kit	16-18 cm
761921-300	761921-310	EXO Block Kit	19-21 cm
761618-000	761618-100	Sealing Boot	16-18 cm
761921-000	761921-100	Sealing Boot	19-21 cm

Scout



Artikelnummer

762800-1XX Höger
762800-0XX Vänster

Egenskaper

- Låg-/medel-/högaktiv nivå (K2-K4)
- Storlek 13-22 cm
- Max patientvikt
 - 13-15 cm: 25 kg
 - 16-18 cm: 45 kg
 - 19-22 cm: 60 kg
- Bygghöjd 4,6-10,8 cm
- Fotens vikt 183-360 g
- Sötvattentålig

Om produkten

En protesfot som erbjuder god energiåtergivning tack vare en blandning av Intelliweave® och slitstark kolfiberkomposit. Kombinationen ger styrka och flexibilitet för lek när barn växer och förändras varje dag, foten klarar sötvattenlekar.

Pyramid är standardlösningen men lamineringsadapter eller ankelblock finns också att välja mellan. I takt med att barnet växer kan också växtförlängningsplattor köpas till. Fotkosmetiken har sandal-tå och finns flera färgnyanser. Val av adapter, färg, hårdhet och storlek görs vid beställning och beställningsformulär hittar du på erimed.se

Tillbehör

Artikelnummer	Produkt
762801-000 (TA SP)	Pyramidadapter Hane
762802-000 (TR SP)	Pyramidadapter Hona
762810-000 (TLAS SP)	Lamineringsadapter Small
762811-000 (TLAM SP)	Lamineringsadapter Medium
762812-000 (TLAL SP)	Lamineringsadapter Large
762830-000 (TXA SP)	EXO adapter stl, 16-22 cm
762830-116 (SC XBKR 1618)	EXO ankelblock hö 16-18
762830-119 (SC XBKR 1922)	EXO ankelblock hö 19-22
762830-016 (SC XBKL 1618)	EXO ankelblock vä 16-18
762830-019 (SC XBKL 1922)	EXO ankelblock vä 19-22
762820-000 (LAGK)	Lamineringsadapter växt-förlängningsplattor kit, (+7,5 mm, +13,5 mm, +19,5 mm)
762830-316 (SC GKRC 1618)	EXO ankelblock plattor hö 16-18
762830-319 (SC GKRC 1922)	EXO ankelblock plattor hö 19-22
762830-216 (SC GKLC 1618)	EXO ankelblock plattor vä 16-18
762830-219 (SC GKLC 1922)	EXO ankelblock plattor vä 19-22

Lågaktiv

A6 Knäled med lås och framkastare



Ingjutningsadapter:
580006-033



Pyramidadapter:
580006-035

Artikelnummer ^(L1321)

580006-000


Egenskaper

- Bygghöjd 108-114,3 mm
- Vikt 651-672 g inklusive adapter
- Max patientvikt 125 kg
- Lätt och kompakt med låg bygghöjd

Om produkten

Ett mekaniskt protesknä med lås och framkastarfjäder. Knät kan med enkelhet ställas om till frisving med hjälp av skruvar. Knäleden finns i två varianter: pyramidadapter eller ingjutningsadapter.

Aura

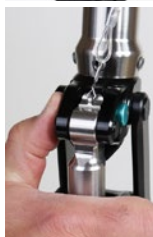

Artikelnummer

760300-150

Egenskaper

- Saltvattentålig
- Flexion 0-135°
- Höjd 161 mm
- Avstånd till knäcenter 17 mm
- Vikt: 665 g
- Max patientvikt 136 kg
- Unik och mycket enkel lås-funktion
- Fast pyramid
- Fungerar för transfemoral amputation och knädisartikulation

Om produkten

Aura är en polycentrisk stabil knäled som är lätt att använda, både för kliniker och patient. Den erbjuder extra stabilitet och stöd/avlastning för den låg- till medelaktiva brukaren. Den polyaxiala designen – ICR (Instant Center of Rotation) gör att rotationscentret förblir bakom belastningslinjen i stående för att skapa förbättrad stabilitet, samtidigt som den tillåter jämn och smidig flexion till sving. När Aura-knät böjs förkortas det, vilket kan öka tå-frigången och säkerheten i gången.

Aura är designad och testad för att klara korrosion och kan användas i såväl hav som klorerade pooler.

Manuellt lås

Aura har en unik ny låsmekanik som möjliggör att enkelt låsa samt låsa upp knät med ett knapp-tryck. Man kan också enkelt justera bland annat flexion och extension med en 4 mm insexnyckel.

Guardian Broms-knä



Artikelnummer

760300-000

Egenskaper

- Flexion 145°
- Bygghöjd 131 mm
- Vikt 533 g
- Max patientvikt 125 kg

Om produkten

En lätt mekanisk knäled med friktionsbroms för kontroll och flexion i stå-fas samt hjälp i extension. Knäleden är perfekt för den nya brukaren att använda under rehabiliteringstiden eller för lågaktiva brukare. Guardian kan lätt justeras och knäleden har en fjärrlåsfunktion som enkelt kan kopplas ur för 145° anatomisk rörelse.

Fyraxlad knäled med två lägen



Artikelnummer (KA.L30 (KK-S802))

560802-000

Egenskaper

- Vikt 630 g
- Max patientvikt 125 kg
- Flexion 145°
- Bygghöjd 135 mm

Om produkten

En protesknäled med två lägen. Låst eller fri rörelse. Knät är mekaniskt med friktionssving-kontroll och framkastarfjäder. Den fyraxlade designen ger knäleden maximal säkerhet och den är utrustad med proximal pyramid.

Badknäled



Pyramidadapter:
560305-010 (KPA-10S)

L-Gaffel
(Beställ även L-Adapter):
560305-003 (KPA-03S)

L-Adapter
(Beställ även L-Gaffel):
560305-011 (KPA-11S)

3-arm-adapter sats:
560305-009
(KPA-09AS, KPA-20S)

Artikelnummer (KA.WLD31 (KK-WA305))

560305-000

Egenskaper

- Sötvtentålig
- Flexion 145°
- Vikt 624 g
- Max patientvikt 100 kg
- Bygghöjd 147 mm

Om produkten

En fyraxlad knäled med eller utan låsfunktion. Badknäleden är nätt och smidig och den har en väl tilltagen flektionsvinkel på 145°. Protesknät lämpar sig både till transfemural amputation och knäexartikulation. Den proximala adaptern kan förflyttas fram eller bak 5 mm, detta gör också att stå-stabiliteten under extension förbättras och flexionen underlättas vid användning.

Icon – mikroprocessorknä



Artikelnummer

760361-000

Egenskaper

- Låg- till hög aktivitetsnivå
- Flexion 130°
- Bygghöjd 170 mm
- Vikt 1530 g
- Max patientvikt 150 kg
- IP-klassificering IP68 (Sötvattentålig)
- Batteritid 3 dagar
- Serviceintervall – ingen

Om produkten

Mikroprocessorknät Icon erbjuder en användarvänlig upplevelse för patienter och ortopedingenjörer. Med snabb respons av sensorerna, effektiv installation och den användarvänliga Stride Studio-appen är detta dynamiska knä utformat för att öka förtroendet hos användaren. Ortopedingenjören kan enkelt komma åt alla justeringar, anpassade lägen och mer i Stride Studio-appen. Protesknät är tillverkad med anmärkningsvärd noggrannhet, svarstid och viktbesparingar. Utrustad med ett batteri som räcker länge och IP68-klassning är Icon den mångsidiga lösningen för användare med låg till hög aktivitet.

För mer information och beställning se erimed.se

Capital Hydraulic knee



Artikelnummer

760350-000 Pyramid

760351-000 34 mm röranslutning

Egenskaper

- Sötvattentålig
- Flexion 130°
- Bygghöjd 230 mm
- Vikt 980 g
- Max patientvikt 150 kg
- 3-lägesfunktion med enkel omkopplare

Om produkten

En hydraulisk enaxlad knäled som är lätt att använda, både för kliniker och patient. Knäleden är mjuk och ger god respons med hjälp av hydrauliken i både sving- och ståfasen. Hållbar, elegant och vattenvänlig knäled som enkelt går att justera med en 4 mm insexnyckel. Capital är knäleden för den medel- till högaktiva brukaren.

Victor


Artikelnummer

760330-000

Egenskaper

- Flexion 145°
- Vikt 710 g
- Max patientvikt 125 kg

Om produkten

En enkelledad pneumatisk knäled med friktionsbroms som styr och kontrollerar stå-fasen. En lätt knäled som passar perfekt för den låg- till medelaktiva brukaren. Kan också vara ett bra alternativ för patienter som vill öka sin aktivitetsnivå efter rehabilitering. Knäleden kan enkelt justeras och den tillåter både långsam och snabb promenad. Victor är en bra knäled som ger frihet och trygghet hos patienterna.

SSK615


Artikelnummer (KK-951)

560951-000 Inbyggd pyramid

560951-001 För trearmsadapter

Egenskaper

- Flexion 145°
- Bygghöjd 230-240 mm
- Vikt 1100 g
- Max patientvikt 136 kg

Om produkten

En knäled med säker och energisnål konstruktion. Den inbyggda stötdämpningen ger brukaren ett naturligt gångmönster. Ett polycentriskt, pneumatiskt knä som finns med inbyggd proximal pyramid eller trearmsadapter.

Pneumatisk fyraxlad knäled


Artikelnummer (KA.P40 (KK-503A1))

560503-001

Egenskaper

- Vikt 713 g
- Max patientvikt 100 kg
- Material Aluminium
- Flexion 145°
- Bygghöjd 205 mm

Om produkten

En pneumatisk knäled med svängfas-kontroll och integrerad pyramid. Knäleden har en slimmad design, ett smidigt pneumatiskt system som ger en fin och följsam gång.

Swan100 Multi axial bouncing



Artikelnummer

540786-000 Swan100 (MO786)
540780-000 Swan (MO780)

Egenskaper

- Medel-/högaktiv nivå
- Flexion 150°
- Bygghöjd 164-170 mm
- Vikt
 - Swan100: 840 g
 - Swan: 670 g
- Max patientvikt
 - Swan100: 100 kg
 - Swan: 75 kg

Om produkten

Ett hydrauliskt protesknä som designats för att ge en naturlig och säker gång. Knät har dynamisk stabiliseringsmekanism för att förhindra ofrivillig böjning av knäleden. Swan finns i två modeller med lite olika egenskaper.

Barn

Barn Knäled



Pyramid:
560102-019

Artikelnummer (KA,WKL10 (KK-102))

560102-000

Egenskaper

- Sötvattentålig
- Flexion 140°
- Bygghöjd 110 mm
- Vikt 324 g
- Max patientvikt 55 kg

Om produkten

En lätt 4-axlad knäled med friktionskontroll, extensionsfjäder-framkastare och justerbar stabilitetskontroll. Knäleden har ett mekaniskt lås som kan plockas bort efter önskemål.

Höft

Höftled Fyraxlad H2



Artikelnummer (I332A)

580002-000

Egenskaper

- Vikt 717 g
- Max patientvikt 100 kg
- Flexion 125°
- Material Aluminium

Om produkten

En polycentrisk höftled med fyrledsaxlad design. Den superlätta konstruktionen gör att höftleden upplevs säkrare, komplett med rör och vinkeladapter. Mekanisk höftled inklusive monteringsplatta.



Amparo Socket – Proteshylsan som anpassas direkt på, och under interaktiv dialog med, brukaren och möjliggör för denne att gå hem med sin protes direkt vid första besöket. Den unika konstruktionen möjliggör vidare att hylsan kan omformas upp till 5 gånger vid förändringar i stumpens volym/ form, vilket eliminerar behovet för såväl ingenjör som brukare att starta om hylstillverkningsprocessen från början vid behov av en hylskorrigerig eller förändring.

Resilience Socket, generella specifikationer

Amputationsnivå	TransTibial (TT) / Underben
Suspensionsalternativ	Passivt vacuum, aktivt vacuum, Pin-lås
Material	Låg-temperatur termoplastisk kon/hylsa förstärkt med kevlar-fibrer, samt förmonterad flyg- och rymdklassificerad aluminiumplatta
Offset	Nej – Centrerad monteringsplatta
Distal Adapter	4-hålsplatta Standard – gäller för Medium och Small hylsa 4-hålsplatta Pediatric – gäller för Pediatric hylsa
Omvärmning/omformning	5 gånger

Resilience Socket Medium och Small

Lätt och motståndskraftig med maximal komfort.

Ger oöverträffad rörlighet och komfort med monteringsplatta av ultralätt aluminium. En termoplastisk hylsa med kevlar-fiberförstärkt distal ände, vilket ger överlägsen styrka och hållbarhet utan att offra smidighet. Resilience Socket medium och small är kompatibel med olika suspensions-alternativ såsom passivt vacuum, aktivt vacuum eller pin-lås – allt för att ge en personlig individuell tillpassning. Få komponenter med stor kompatibilitet ger också en mycket ekonomisk lagerhållning.

Resilience Socket Medium



Artikelnummer

550300-001 (RS-M-DB)

Egenskaper

- Max vikt 125 kg
- Distal omkrets m liner 20-38 cm
- Max kvarvarande längd stump 27 cm
- Hylsans vikt 1000 g*
- Färg Black Carbon**

* Vid tillpassning tas mellan 100-400 g bort beroende på stumpens längd. ** Svart hylsa lagerhålls. Övriga färger på beställning, se vår hemsida – mörkblå, ljusblå, kamouflage, custom made.

Resilience Socket Small



Artikelnummer

550301-001 (RS-S-DB)

Egenskaper

- Max vikt 100 kg
- Distal omkrets m liner 16-24 cm
- Max kvarvarande längd stump 27 cm
- Hylsans vikt 700 g*
- Färg Black Carbon**

* Vid tillpassning tas mellan 100-300 g bort beroende på stumpens längd. ** Svart hylsa lagerhålls. Övriga färger på beställning, se vår hemsida – mörkblå, ljusblå, kamouflage, custom made.

Resilience Socket Barn

Stärker små äventyrare.

Denna hylsa är speciellt utformad för barns energiska liv, och för att möta de unika behoven hos växande barn prioriterar hylsan en säker och bekväm passform som möjliggör naturlig rörelse och utforskning. Den är utformad med ultralätta men ändå robusta material, vilket garanterar överlägsen styrka och hållbarhet för att motstå påfrestningarna av barndomens lek. Och med en hylsa som enkelt kan omformas i takt med att barnet växer möjliggör detta en enklare tillvaro för såväl barn som anhöriga.

Resilience Socket Pediatric



Artikelnummer

550302-001 (RS-PE-BB)

Egenskaper

- Max vikt 60 kg
- Distal omkrets m liner 12-18 cm
- Max kvarvarande längd stump 27 cm
- Hylsans vikt 700 g*
- Färg Ljusgrön – Bumble Bee**

*Vid tillpassning tas mellan 100-300 g bort beroende på stumpens längd. ** Bumble Bee-hylsa lagerhålls. Övriga färger på beställning, se vår hemsida – flowers, svart, vit.

Suspensionssystem för Resilience Sockets

Resilience Socket Medium, Small samt Pediatrics kan användas med Passivt vacuumsystem, Aktivt vacuumsystem och med Pin-lås system. Beställs separat.



Passivt Vacuum

Resilience Socket använder en envägsventilteknik som skapar en säker tätning utan att generera tryckpunkter. Denna innovativa design integreras sömlöst med liner och sleeve, vilket ger optimalt stöd för dagliga aktiviteter.



Aktivt vacuum

Aktiv vakuumteknik i Resilience Socket minimerar piston-effekt och inre rörelser, vilket gör att du kan känna din benprotes mer naturligt. Denna förbättrade känsla av kroppsmedvetenhet, kallad proprioception, samarbetar med ditt balanssystem för att ge dig en tydlig känsla för din rörelse och position.



Pin-lås system

Resilience Socket har en avancerad pinlåsmekanism som ger en säker passform utan att man behöver en separat sleeve. Denna innovativa design har en snabbkopplingsfunktion för enkel på- och avtagning, vilket effektiviserar din dagliga rutin.

Tillbehör för Resilience Socket Medium och Small

Artikelnummer		Produkt
550300-006	RVK	Resilience Button One Way valve kit S/M
550300-007	PLU-R	Resilience socket Pin Lock Unit S/M
550300-008	EVK	Resilience socket Elevated Vacuum kit S/M



Resilience Button One Way valve kit S/M
550300-006 (RVK)



Resilience socket Pin Lock Unit S/M
550300-007 (PLU-R)



Resilience socket Elevated Vacuum kit S/M
550300-008 (EVK)

Tillbehör för Resilience Socket Pediatric

Artikelnummer		Produkt
550302-005	RVK-PE	Resilience Button One Way valve kit Pediatrics
550302-006	PLU-PE	Resilience socket Pin Lock Unit Pediatrics
550300-008	EVK	Resilience socket Elevated Vacuum kit S/M



Resilience Button One Way valve kit Pediatrics
550302-005 (RVK-PE)



Resilience socket Pin Lock Unit Pediatrics
550302-006 (PLU-PE)



Resilience socket Elevated Vacuum kit S/M
550300-008 (EVK)

Confidence Socket, generella specifikationer

Amputationsnivå	TransTibial (TT) / Underben
Suspensionsalternativ	Passivt vacuum, Pin-lås
Material	Låg-temperatur termoplastisk kon/hylsa med förmonterad distal aluminiumplatta
Plattans offset	1 cm
Distal Adapter	4-hålsplatta Standard
Omvärmning/omformning	5 gånger



Confidence Socket Small och Large

Materialkon för transtibial proteshylsa (TT)

Confidence Socket är en revolution inom proteshylsteknik för underben. Den direktformnings-teknik som används vid montering av Confidence Socket möjliggör en otroligt intuitiv och effektiv tillpassning med en mycket låg felmarginal. Tack vare termoplastmaterialet kan hylsan värmas om flera gånger för att möjliggöra volymförändringar i en amputerad benstump. Hylsan levereras med en förmonterad och förlateraliserad monteringsplatta och möjliggör alternativ suspension.

Hylsan finns i två storlekar – small och large, samt med två alternativa suspensioner – vacuum eller pinlås.

	Artikelnummer	Max vikt	Distal omkrets m liner	Max kvarvarande längd stump	Hylsans vikt *	Färg
Vacuum small	550200-001 (CSBK-V-S)	125 kg	23-34 cm	27 cm	1300 g	Svart
Vacuum Large	550200-002 (CSBK-V-L)	150 kg	30-45 cm	27 cm	1400 g	Svart
Pin Small	550200-003 (CSBK-P-S)	125 kg	23-34 cm	27 cm	1300 g	Svart
Pin Large	550200-004 (CSBK-P-L)	150 kg	30-45 cm	27 cm	1400 g	Svart

* Vid tillpassning tas mellan 100-400 g bort beroende på stumpens längd.

Suspensionssystem för Confidence Sockets

Confidence Socket (TT) kan användas med envägs-ventil/vacuum, alternativt med Pin-låssystem. Val av suspension avgör valet av hylsvariant.vBeställs separat.



Passivt Vacuum/envägs-ventil

Confidence Socket erbjuder utmärkt komfort och tillförlitlighet för amputerade. Envägsventilen skapar en tät passform utan att resultera i områden med högt tryck. Den används med liner och sleeve.



Pin-lås system

Confidence Socket har ett pinlåssystem som eliminerar behovet av en sleeve och underlättar på- och avtagning med sin snabbkoppling.

Tillbehör för Confidence Socket Small & Large Vacuum/Ventil samt Small & Large Pin-lås

Artikelnummer		Produkt
550200-005	VAL	Confidence Socket One Way valve kit S/L
550200-006	PLU	Confidence Socket Pin Lock Unit S/L

Trust Socket, generella specifikationer

Amputationsnivå	TransTibial (TT) / Underben
Suspensionsalternativ	Fritt val
Material	Låg-temperatur termoplastisk kon/hylsa
Omvärmning/omformning	5 gånger (gäller hylsan)

Trust Socket

Prisvärd komfort och flexibilitet.

En hylsa som effektivt anpassas direkt på brukaren vilket minimerar fel och säkerställer en bekväm hylsa direkt. I likhet med Confidence Socket använder Trust Socket ett starkt men ändå anpassningsbart material, vilket möjliggör justeringar och omformning över tid. Trust Socket levereras utan förmonterad distal platta, vilket ger protesingenjören möjlighet att välja den optimala adaptorn och dess placering för att tillgodose unika behov. Hylsan är kompatibel med en mängd olika adapters vilket säkerställer en bekväm och säker passform.

Trust Socket



Artikelnummer

550100-000 (TSBK)

Egenskaper

- Max vikt 100 kg
- Distal omkrets m liner 14-38 cm
- Max kvarvarande längd stump 27 cm
- Hylsans vikt 800 g *
- Färg Vit

* Vid tillpassning tas mellan 100-400 g bort beroende på stumpens längd.

Utrustning för hylstillverkning

För tillverkning av Amparo sockets finns ett smidigt mobilt verktygsset, där allt som behövs för att komma igång finns inkluderat. Det som behöver kompletteras från kliniken är enbart en varmluftspistol med 2000 W effekt.

Det kompletta verktygs-setet gör att man enkelt kan ta med sig och tillverka proteshylsan på lämplig plats hos brukaren om denna av någon anledning inte kan komma till kliniken.

Amparo Verktygsset

Artikelnummer	Beskrivning
550400-000 (AMTS-02)	Komplett verktygsset enl bild
550400-001 (MOX)	Mobil värmeugn
550400-002 (VP-02)	Mobil vacuum-pump
550400-003 (VAX-2)	Vacuum adaptor
550400-004 (SP3)	Distans-set (spacer pads)
550400-005 (TSB)	Verktygs-bag
550400-006 (RWB)	Workshop-bag
550400-007 (MSH)	Metall-sax
550400-008 (TSC)	Tyg-sax
550400-009 (TGL)	Thermo-handskar
550400-010 (PCF)	Plast-film
550400-011 (MT-R)	Nylonslang
550400-012 (PXW)	Märkpenna

Alla verktyg, tillbehör och förbrukningsartiklar kan även beställas separat.



Mobil värmeugn
550400-001 (MOX)



Mobil vacuum-pump
550400-002 (VP-02)



Vacuum adaptor
550400-003 (VAX-2)



Distans-set (spacer pads)
550400-004 (SP3)



Verktygs-bag
550400-005 (TSB)



Workshop-bag
550400-006 (RWB)



Metall-sax
550400-007 (MSH)



Tyg-sax
550400-008 (TSC)



Thermo-handskar
550400-009 (TGL)



Plast-film
550400-010 (PCF)



Nylonslang
550400-011 (MT-R)



Märkpenna
550400-012 (PXW)

Färgmarkerade artiklar är lagervara, övriga är beställningsvara.

Gel

LITE Excelsior Liner



Egenskaper

- Integrerad matris (8 cm) minimerar pistongverkan och förbättrar stabiliteten
- Posterior och anterior har en unik design för lättare stretch/böjförmåga
- Hårdheten är ca 38 shore, kan formas om i ca 80°C

Art.nr Cushion	Art.nr Locking	Storlek	Tjocklek
629763-012 (4W7500-03-IS)	629713-012 (4W7100-03-IS)	ISmall	3 mm
629763-003 (4W7500-03-M)	629713-003 (4W7100-03-M)	Medium	3 mm
629763-004 (4W7500-03-L)	629713-004 (4W7100-03-L)	Large	3 mm
629763-014 (4W7500-03-IL)	629713-014 (4W7100-03-IL)	ILarge	3 mm
629763-005 (4W7500-03-XL)	629713-005 (4W7100-03-XL)	XLarge	3 mm
629763-015 (4W7500-03-XLP)	629713-015 (4W7100-03-XLP)	XLarge Plus	3 mm
629763-006 (4W7500-03-XXL)	629713-006 (4W7100-03-XXL)	XXLarge	3 mm
629766-012 (4W7500-06-IS)	629716-012 (4W7100-06-IS)	ISmall	6 mm
629766-003 (4W7500-06-M)	629716-003 (4W7100-06-M)	Medium	6 mm
629766-004 (4W7500-06-L)	629716-004 (4W7100-06-L)	Large	6 mm
629766-014 (4W7500-06-IL)	629716-014 (4W7100-06-IL)	ILarge	6 mm
629766-005 (4W7500-06-XL)	629716-005 (4W7100-06-XL)	XLarge	6 mm
629766-015 (4W7500-06-XLP)	629716-015 (4W7100-06-XLP)	XLarge Plus	6 mm
629766-006 (4W7500-06-XXL)	629716-006 (4W7100-06-XXL)	XXLarge	6 mm
629769-003 (4W7500-09-M)	629719-003 (4W7100-09-M)	Medium	9 mm
629769-004 (4W7500-09-L)	629719-004 (4W7100-09-L)	Large	9 mm
629769-014 (4W7500-09-IL)	629719-014 (4W7100-09-IL)	ILarge	9 mm
629769-005 (4W7500-09-XL)	629719-005 (4W7100-09-XL)	XLarge	9 mm

Om produkten

En TPE gel liner som finns i två utföranden med och utan distalt fäste. Cushion versionen har 2 mm tjockare botten och passar både för TT och TF nivå.



LITE GEL Liner

Art.nr Cushion	Art.nr Locking	Mått dist/prox	Storlek	Tjocklek
629503-002 (4W-95 03)	629003-002 (4W-90 03)	12-16 cm/22-30 cm	Small	3 mm
629503-012 (4W-95 03)	629003-012 (4W-90 03)	17-22 cm/26-35 cm	ISmall	3 mm
629503-003 (4W-95 03)	629003-012 (4W-90 03)	20-26 cm/29-42 cm	Medium	3 mm
629503-004 (4W-95 03)	629003-004 (4W-90 03)	22-31 cm/38-55 cm	Large	3 mm
629503-014 (4W-95 03)	629003-014 (4W-90 03)	28-39 cm/40-61 cm	ILarge	3 mm
629503-005 (4W-95 03)	629003-005 (4W-90 03)	35-50 cm/45-71 cm	X-Large	3 mm
629503-006 (4W-95 03)	629003-006 (4W-90 03)	34-60 cm/47-76 cm	XX-Large	3 mm
629506-002 (4W-95 06)	629006-002 (4W-90 06)	12-16 cm/22-30 cm	Small	6 mm
629506-012 (4W-95 06)	629006-012 (4W-90 06)	17-22 cm/26-35 cm	ISmall	6 mm
629506-003 (4W-95 06)	629006-003 (4W-90 06)	20-26 cm/29-42 cm	Medium	6 mm
629506-004 (4W-95 06)	629006-004 (4W-90 06)	22-31 cm/38-55 cm	Large	6 mm
629506-014 (4W-95 06)	629006-014 (4W-90 06)	28-39 cm/40-61 cm	ILarge	6 mm
629506-005 (4W-95 06)	629006-005 (4W-90 06)	35-50 cm/45-71 cm	X-Large	6 mm
629506-006 (4W-95 06)	629006-006 (4W-90 06)	34-60 cm/47-76 cm	XX-Large	6 mm
629509-002 (4W-95 09)	629009-002 (4W-90 09)	12-16 cm/22-30 cm	Small	9 mm
629509-012 (4W-95 09)	629009-012 (4W-90 09)	17-22 cm/26-35 cm	ISmall	9 mm
629509-003 (4W-95 09)	629009-003 (4W-90 09)	20-26 cm/29-42 cm	Medium	9 mm
629509-004 (4W-95 09)	629009-004 (4W-90 09)	22-31 cm/38-55 cm	Large	9 mm
629509-014 (4W-95 09)	629009-014 (4W-90 09)	28-39 cm/40-61 cm	ILarge	9 mm
629509-005 (4W-95 09)	629009-005 (4W-90 09)	35-50 cm/45-71 cm	X-Large	9 mm

Om produkten

En TPE gel liner i två utföranden med och utan distalt fäste. Gelen är mineraloljebaserad och ger god komfort, vidhäftning och är extra skonsam mot huden. Linern är enkel att ta på och av, går bra att använda både med och utan kräm och talk. Önskas bättre passform - för-forma linern på en gipsmodell eller ett skummotiv.

Laminerings-dummyliner av silikon (629500) finns att beställa, se sida 35.

LITE GEL TF Transfemoral



Artikelnummer	Mått 4 cm ovan distala änden	Storlek
Lite TF Gel Locking Liner		
629083-002 (4W-90-TF3S-G)	12-16 cm	Small
629083-003 (4W-90-TF3M-G)	19-26 cm	Medium
629083-004 (4W-90-TF3L-G)	26-35 cm	Large
629083-014 (4W-90-TF3IL-G)	29-40 cm	ILarge
629083-005 (4W-90-TF3XL-G)	34-46 cm	X-Large
629083-006 (4W-90-TF3XXL-G)	36-60 cm	XX-Large
Lite TF Gel Cushion Liner		
629583-004 (4W-95-TF3L-G)	26-35 cm	Large
629583-014 (4W-95-TF3IL-G)	29-40 cm	ILarge
629583-005 (4W-95-TF3XL-G)	34-46 cm	X-Large

Om produkten

En mineraloljebaserat TPE gel som ger god komfort, vidhäftning och är extra hudvänlig. Den lämpar sig väl för lårbensamputerade. Linern har armering längs med hela linern för minimerad pumpeffekt. För bättre passform – för-forma linern på gips- eller skummotiv. Linern är grå, 3 mm och finns i flera storlekar med och utan distalt fäste.

Smart Seal Liner



Artikelnummer Tjocklek 3 mm	Artikelnummer Tjocklek 6 mm	Mått 6 cm ovan distala änden
SBFR – Smart Seal underben (utan fäste)		
720860-020 (SBFR 20-3)	720861-020 (SBFR 20-6)	20-23 cm
720860-024 (SBFR 24-3)	720861-024 (SBFR 24-6)	24-25 cm
720860-026 (SBFR 26-3)	720861-026 (SBFR 26-6)	26-27 cm
720860-028 (SBFR 28-3)	720861-028 (SBFR 28-6)	28-31 cm
SAFR – Smart Seal lårben (utan fäste)		
720870-026 (SAFR 26-3)	720871-026 (SAFR 26-6)	26-27 cm
720870-028 (SAFR 28-3)	720871-028 (SAFR 28-6)	28-31 cm
720870-032 (SAFR 32-3)	720871-032 (SAFR 32-6)	32-37 cm
720870-038 (SAFR 38-3)	720871-038 (SAFR 38-6)	38-43 cm

Artikelnummer	Tjocklek	Mått 6 cm ovan distala änden
SADT – Smart Seal lårben (med fäste)		
720880-020 (SADT 20-3)	3 mm Locking	20-23 cm
720880-024 (SADT 24-3)	3 mm Locking	24-25 cm
720880-026 (SADT 26-3)	3 mm Locking	26-27 cm
720880-028 (SADT 28-3)	3 mm Locking	28-31 cm
720880-032 (SADT 32-3)	3 mm Locking	32-37 cm
720880-038 (SADT 38-3)	3 mm Locking	38-43 cm
Önskar ni beställa SADT XX - 6 mm, ange artikelnummer: 720881-0XX		

Om produkten

Består av deras HD GEL. Linern har ett vågigt integrerat band som griper fast i hylsväggen och formar en säker och lufttät förankring. Det mjuka bandet bildar ett säkert gränssnitt mellan proteshylsa och liner utan att minska stumpens blodflöde. Smart Seal Linern har ett sömlöst tygöverdrag med modernt utseende.

Det finns 3 varianter med och utan fäste som passar till både transtibial och transfemorala brukare. Underben (BK) silikonbanden börjar 8 cm ovan distala änden och lårben (AK) silikonbanden börjar 14 cm ovan distala änden.

UltraSeal Liner



Egenskaper

- Material: OptiGel
- Tjocklek: 3 mm
- Nivå: Transfemoral och Transtibial
- Aktivitetsnivå: K1-K4
- Hög ring: 18 cm ovan distala änden
- Låg ring: 12 cm ovan distala änden

Om produkten

Den nya revolutionerande UltraSeal gel-linern – en banbrytande produkt som sömlöst integrerar avancerad förseglingsteknik med gelens överlägsna fördelar.

Med ett integrerat band tillgängligt i två olika höjder kommer användaren att uppleva en lufttät försegling vid applicering av hylsan. I kombination med OptiGel erbjuder denna liner en exceptionell komfort och utmärkt anpassning till den skadade extremiteten, vilket säkerställer en säker och åtsittande passform som förbättrar kontroll, komfort och säkerhet.

Artikelnummer	Mått 6 cm ovan distala änden
Cushion (Hög ring)	
721100-020 (USHGC20)	20-21 cm
721100-024 (USHGC24)	24-25 cm
721100-026 (USHGC26)	26-27 cm
721100-028 (USHGC28)	28-29 cm
721100-032 (USHGC32)	32-34 cm
721100-035 (USHGC35)	35-37 cm
721100-038 (USHGC38)	38-40 cm
721100-044 (USHGC44)	44-47 cm
Locking (Hög ring)	
721100-100 (USHGLXX), notera storleken (XX) vid beställning	

Cushion (Låg ring)	
721120-020 (USLGC20)	20-21 cm
721120-024 (USLGC24)	24-25 cm
721120-026 (USLGC26)	26-27 cm
721120-028 (USLGC28)	28-29 cm
721120-032 (USLGC32)	32-34 cm
721120-035 (USLGC35)	35-37 cm
721120-038 (USLGC38)	38-40 cm
721120-044 (USLGC44)	44-47 cm
Locking (Låg ring)	
721120-100 (USLGLXX), notera storleken (XX) vid beställning	

Anterior Posterior Liner



Artikelnummer	Produkt	Mått 6 cm ovan distala änden
720763-020 (APFR 20-TP)	Liner A6 till P3 mm	20-23 cm
720763-024 (APFR 24-TP)	Liner A6 till P3 mm	24-25 cm
720763-026 (APFR 26-TP)	Liner A6 till P3 mm	26-27 cm
720763-028 (APFR 28-TP)	Liner A6 till P3 mm	28-31 cm
720763-032 (APFR 32-TP)	Liner A6 till P3 mm	32-37 cm
720703-016 (SPFR 16-3)	Liner 3 mm	16-19 cm
720703-020 (SPFR 20-3)	Liner 3 mm	20-23 cm
720703-024 (SPFR 24-3)	Liner 3 mm	24-25 cm
720703-026 (SPFR 26-3)	Liner 3 mm	26-27 cm
720703-028 (SPFR 28-3)	Liner 3 mm	28-31 cm
720703-032 (SPFR 32-3)	Liner 3 mm	32-37 cm
720703-038 (SPFR 38-3)	Liner 3 mm	38-43 cm
720703-044 (SPFR 44-3)	Liner 3 mm	44-53 cm

Om produkten

En gelliner som finns i två utföranden med 6 mm anterior och 3 mm posterior tjocklek, för att på så vis minska hopklumpning i knävecket. Den finns också i endast 3 mm. Linern passar bra till transtibiala brukare med medel- och hög aktivitetsnivå som önskar större kontroll och rörelsefrihet utan att offra komfort. Tyget är av hög prestanda, har en vågrät stretch med reducerad långsgående stretch.

ProFit Liner

A L P S



Egenskaper

- Material: OptiGel
- Tjocklek: 3 mm eller 6 mm
- Nivå: Transfemoral och Transtibial
- Aktivitetsnivå: K2-K4

Artikelnummer	Mått 6 cm ovan distala änden	Tjocklek
Cushion		
721003-016 (PFGFR16-3)	16-19 cm	3 mm
721003-020 (PFGFR20-3)	20-23 cm	3 mm
721003-024 (PFGFR24-3)	24-25 cm	3 mm
721003-026 (PFGFR26-3)	26-27 cm	3 mm
721003-028 (PFGFR28-3)	28-31 cm	3 mm
721003-032 (PFGFR32-3)	32-34 cm	3 mm
721003-035 (PFGFR35-3)	35-37 cm	3 mm
721003-038 (PFGFR38-3)	38-43 cm	3 mm
721003-044 (PFGFR44-3)	44-53 cm	3 mm
Locking		
721103-300 (PFGDTXX), notera storleken (XX) vid beställning		3 mm
Cushion		
731106-016 (PFGFR16-6)	16-19 cm	6 mm
731106-020 (PFGFR20-6)	20-23 cm	6 mm
731106-024 (PFGFR24-6)	24-25 cm	6 mm
731106-026 (PFGFR26-6)	26-27 cm	6 mm
731106-028 (PFGFR28-6)	28-31 cm	6 mm
731106-032 (PFGFR32-6)	32-34 cm	6 mm
731106-035 (PFGFR35-6)	35-37 cm	6 mm
731106-038 (PFGFR38-6)	38-43 cm	6 mm
731106-044 (PFGFR44-6)	44-53 cm	6 mm
Locking		
721106-600 (PFGDTXX), notera storleken (XX) vid beställning		6 mm

Om produkten

Den innovativa ProFit liner är utformad för att ge amputerade en oöverträffad nivå av komfort och kontroll. Anpassningen till den skadade extremiteten är mycket god tack vare OptiGel-teknik och en förbättrad distal konstruktion, ger ProFit en säker och åtsittande passform som förbättrar kontroll, komfort och säkerhet för användaren, vilket möjliggör större självförtroende i vardagliga aktiviteter.

Locking versionen har en innovativ U-formad matris för att begränsa vertikal sträckning utan att begränsa den kvarvarande extremiteten.

Easy Liner

A L P S



Egenskaper

- Elastiskt – Mjuk och töjbar utan motstycke
- Slitstark – Tål hård behandling
- Amputationsnivå TT och TF
- Erbjuder både vertikal och horisontell stretch

Art.nr Cushion	Art.nr Locking	Tjocklek	Mått 6 cm ovan distala änden
720200-016 (ELFR-16)	720300-016 (ELDT-16)	Med tyg 3 mm	16-19 cm
720200-020 (ELFR-20)	720300-020 (ELDT-20)	Med tyg 3 mm	20-23 cm
720200-024 (ELFR-24)	720300-024 (ELDT-24)	Med tyg 3 mm	24-27 cm
720200-028 (ELFR-28)	720300-028 (ELDT-28)	Med tyg 3 mm	28-31 cm
720200-032 (ELFR-32)	720300-032 (ELDT-32)	Med tyg 3 mm	32-35 cm
720200-038 (ELFR-38)	720300-038 (ELDT-38)	Med tyg 3 mm	36-44 cm
720200-044 (ELFR-44)	720300-044 (ELDT-44)	Med tyg 3 mm	44-53 cm
720201-016 (ELFR-16)	720301-016 (ELDT-16)	Med tyg 6 mm	16-19 cm
720201-020 (ELFR-20)	720301-020 (ELDT-20)	Med tyg 6 mm	20-23 cm
720201-024 (ELFR-24)	720301-024 (ELDT-24)	Med tyg 6 mm	24-27 cm
720201-028 (ELFR-28)	720301-028 (ELDT-28)	Med tyg 6 mm	28-31 cm
720201-032 (ELFR-32)	720301-032 (ELDT-32)	Med tyg 6 mm	32-35 cm
720201-038 (ELFR-38)	720301-038 (ELDT-38)	Med tyg 6 mm	36-44 cm
720201-044 (ELFR-44)	720301-044 (ELDT-44)	Med tyg 6 mm	44-53 cm
720202-016 (ELFR-16)	720302-016 (ELDT-16)	Med tyg 6/3 mm	16-19 cm
720202-020 (ELFR-20)	720302-020 (ELDT-20)	Med tyg 6/3 mm	20-23 cm
720202-024 (ELFR-24)	720302-024 (ELDT-24)	Med tyg 6/3 mm	24-27 cm
720202-028 (ELFR-28)	720302-028 (ELDT-28)	Med tyg 6/3 mm	28-31 cm
720202-032 (ELFR-32)	720302-032 (ELDT-32)	Med tyg 6/3 mm	32-39 cm

Om produkten

EasyLiner är en liner tillverkad av Alps EasyGel, den ger en kombination av mjukhet, dämpning och styrka. Den finns i två varianter med och utan distalt fäste. Linern finns också i 3 olika utföranden: 3 mm, 6 mm och 3 till 6 mm tapered. Easyliner rekommenderas för brukare med känslig hud och diabetes tack vare antioxidanter i gelen. Linern är lätt att ta på även vid nedsatt funktion i händerna.

Easy Liner Super Stretch



Artikelnummer	Tjocklek	Mått 6 cm ovan distala änden
720100-016 (ELPX-16)	Utan tyg 6 mm	16-19 cm
720100-020 (ELPX-20)	Utan tyg 6 mm	20-23 cm
720100-024 (ELPX-24)	Utan tyg 6 mm	24-27 cm
720100-028 (ELPX-28)	Utan tyg 6 mm	28-31 cm

Egenskaper

- Elastiskt – Mjuk och töjbar utan motstycke
- Slitstark – Tål hård behandling

Om produkten

En gelliner utan distalt fäste. Modellen är utan tyg: 6 mm uniform med en 12 mm tjock distal del.

Silikon

LITE Dummy Liner



Artikelnummer 3 mm	Artikelnummer 6 mm	Mått dist/prox	Storlek
629500-302 (4D9500-03-S)	629500-602 (4D9500-06-S)	12-16 cm/22-30 cm	Small
629500-312 (4D9500-03-IS)	629500-612 (4D9500-06-IS)	17-22 cm/26-35 cm	ISmall
629500-303 (4D9500-03-M)	629500-603 (4D9500-06-M)	20-26 cm/29-42 cm	Medium
629500-304 (4D9500-03-L)	629500-604 (4D9500-06-L)	22-26 cm/38-55 cm	Large
629500-314 (4D9500-03-IL)	629500-614 (4D9500-06-IL)	28-39 cm/40-61 cm	ILarge
629500-305 (4D9500-03-XL)	629500-605 (4D9500-06-XL)	30-50 cm/45-71 cm	X-Large
629503-006 (4D9500-03-XXL)	629506-006 (4D9500-06-XXL)	34-60 cm/47-76 cm	XX-Large

Om produkten

En silikonliner. Dummy linern används som distans på gips- eller skummotivet vid tillverkning. För att ge plats för linern som sedan ska få plats tillsammans med stumpen i hylsan vid provning.

Finns i två tjocklekar: 3 mm och 6 mm.

Tips!

Har du tänkt använda en 6 mm TPE gelliner till patienten, använd en 3 mm dummyliner vid tillverkning för lämplig reduktion.



Lite Arm Liner



Artikelnummer	Längd	Mått Distalt/Proximalt
622021-012 (4A2021-12)	24 cm	12 cm/15,5 cm
622021-014 (4A2021-14)	26 cm	14 cm/19,5 cm
622021-016 (4A2021-16)	26 cm	16 cm/21 cm
622021-018 (4A2021-18)	30 cm	18 cm/29 cm
622021-020 (4A2021-20)	30 cm	20 cm/34 cm
622021-022 (4A2021-22)	30 cm	22 cm/39 cm
622021-055 (5W055)	Shuffle Lock Armprotes, levereras med dummy	

Om produkten

En tunn (1,3 mm) liner med distalt fäste. Linern är av silikon med ett tygöverdrag som gör att den blir lätt att rulla på huden. Lite Arm har minimal pistongverkan tack vare matrisen.

SoftSil Liner



Artikelnummer	Mått 6 cm ovan distala änden
Cushion	
720610-020 (SSGSC-20)	20-21 cm
720610-022 (SSGSC-22)	22-23 cm
720610-024 (SSGSC-24)	24-25 cm
720610-026 (SSGSC-26)	26-27 cm
720610-028 (SSGSC-28)	28-29 cm
720610-030 (SSGSC-30)	30-31 cm
720610-032 (SSGSC-32)	32-34 cm
720610-035 (SSGSC-35)	35-37 cm
720610-038 (SSGSC-38)	38-40 cm
720610-041 (SSGSC-41)	41-43 cm
720610-044 (SSGSC-44)	44-47 cm
Locking	
720610-100 (SSGSL-XX), notera storleken (XX) vid beställning	

Egenskaper

- Material: Silikon
- Tjocklek: 3 mm
- Nivå: Transfemoral och Transtibial
- Aktivitetsnivå: K2-K4

Om produkten

SoftSil Liner är tillverkad av Alps exklusiva OptiSil-teknik – ren och hypoallergen silikon med en utsida av grått tyg av begränsad vertikal stretch. Linern är mycket lätt och främjar hudens naturliga värmereglering, den ger den perfekta balansen mellan kontroll och komfort. Med SoftSil kan användare uppleva utmärkt rörelsefrihet utan att offra den bekväma fjädringen som linern ger och behöver för sina proteser.

Locking versionen har en innovativ U-formad matris för att begränsa vertikal sträckning utan att begränsa den kvarvarande extremiteten.

LITE Liner Silikon SkinTEX 2 SOFT



Egenskaper

- Material: Silikon Gel
- Tjocklek: 3 mm
- Nivå: Transtibial
- Aktivitetsnivå: K1-K3

Om produkten

LITE liner silikon är en silikon liner med en tjocklek på 3 mm som finns i två utföranden: med och utan distalt fäste. Linern är lätt att rulla på med sitt sömlösa tyg. Locking linern är tillverkad med 10 cm matris för minskad kolvbildning.

Artikelnummer Cushion	Artikelnummer Locking	Mått 4 cm ovan distala änden
624122-020 (4W4122-20-G)	624022-020 (4W4022-10-20-G)	20 cm
624122-021 (4W4122-21-G)	624022-021 (4W4022-10-21-G)	21 cm
624122-022 (4W4122-22-G)	624022-022 (4W4022-10-22-G)	22 cm
624122-235 (4W4122-23,5-G)	624022-235 (4W4022-10-23,5-G)	23,5 cm
624122-025 (4W4122-25-G)	624022-025 (4W4022-10-25-G)	25 cm
624122-265 (4W4122-26,5-G)	624022-265 (4W4022-10-26,5-G)	26,5 cm
624122-028 (4W4122-28-G)	624022-028 (4W4022-10-28-G)	28 cm
624122-030 (4W4122-30-G)	624022-030 (4W4022-10-30-G)	30 cm
624122-032 (4W4122-32-G)	624022-032 (4W4022-10-32-G)	32 cm
624122-034 (4W4122-34-G)	624022-034 (4W4022-10-34-G)	34 cm
624122-036 (4W4122-36-G)	624022-036 (4W4022-10-36-G)	36 cm
624122-038 (4W4122-38-G)	624022-038 (4W4022-10-38-G)	38 cm
624122-040 (4W4122-40-G)	624022-040 (4W4022-10-40-G)	40 cm
624122-042 (4W4122-42-G)	624022-042 (4W4022-10-42-G)	42 cm
624122-045 (4W4122-45-G)	624022-045 (4W4022-10-45-G)	45 cm

LITE Liner Silikon SkinTEX 6 SOFT



Egenskaper

- Material: Silikon Gel
- Tjocklek: 6 mm
- Nivå: Transtibial
- Aktivitetsnivå: K1-K3

Om produkten

LITE liner silikon är en silikon liner med en tjocklek på 6 mm som finns i två utföranden: med och utan distalt fäste. Linern är lätt att rulla på med sitt sömlösa tyg. Locking linern är tillverkad med 10 cm matris för minskad kolvbildning.

Artikelnummer Cushion	Artikelnummer Locking	Mått 4 cm ovan distala änden
624162-020 (4W4162-10-20-G)	624062-020 (4W4062-10-20-G)	20 cm
624162-021 (4W4162-10-21-G)	624062-021 (4W4062-10-21-G)	21 cm
624162-022 (4W4162-10-22-G)	624062-022 (4W4062-10-22-G)	22 cm
624162-235 (4W4162-23,5-G)	624062-235 (4W4062-10-23,5-G)	23,5 cm
624162-025 (4W4162-25-G)	624062-025 (4W4062-10-25-G)	25 cm
624162-265 (4W4162-26,5-G)	624062-265 (4W4062-10-26,5-G)	26,5 cm
624162-028 (4W4162-28-G)	624062-028 (4W4062-10-28-G)	28 cm
624162-030 (4W4162-30-G)	624062-030 (4W4062-10-30-G)	30 cm
624162-032 (4W4162-32-G)	624062-032 (4W4062-10-32-G)	32 cm
624162-034 (4W4162-34-G)	624062-034 (4W4062-10-34-G)	34 cm
624162-036 (4W4162-36-G)	624062-036 (4W4062-10-36-G)	36 cm
624162-038 (4W4162-38-G)	624062-038 (4W4062-10-38-G)	38 cm
624162-040 (4W4162-40-G)	624062-040 (4W4062-10-40-G)	40 cm
624162-042 (4W4162-42-G)	624062-042 (4W4062-10-42-G)	42 cm
624162-045 (4W4162-45-G)	624062-045 (4W4062-10-45-G)	45 cm

Färgmarkerade artiklar är lagervara, övriga är beställningsvara.

Lite Sleeve



Egenskaper

- Material TPE Gel
- Tjocklek 3 mm

Om produkten

En sleeve med mineral-oljebaserad gel som ger god komfort, hög vidhäftning samt är extra hudvänlig. Sleeveen är mycket töjbar vilket underlättar vid på- och avtagning. Ger god rotationsstabilitet.

Artikelnummer	Mått 5 cm nedan patella	Storlek
Blå		
620800-001 (4W80-S-B)	14-19 cm	S
620800-002 (4W80-M-B)	19-28 cm	M
620800-003 (4W80-L-B)	28-38 cm	L
620800-004 (4W80-XL-B)	38-54 cm	XL
Beige		
620800-101 (4W80-S-H)	14-19 cm	S
620800-102 (4W80-M-H)	19-28 cm	M
620800-112 (4W80-MP-H)	24-35 cm	MP
620800-103 (4W80-L-H)	28-38 cm	L
620800-113 (4W80-LP-H)	31-46 cm	LP
620800-104 (4W80-XL-H)	38-54 cm	XL
Svart		
620800-201 (4W80-S-S)	14-19 cm	S
620800-202 (4W80-M-S)	19-28 cm	M
620800-203 (4W80-L-S)	28-38 cm	L
620800-204 (4W80-XL-S)	38-54 cm	XL
Beige – Förflexad		
620880-101 (4W88-S-H)	14-19 cm	S
620880-102 (4W88-M-H)	19-28 cm	M
620880-103 (4W88-L-H)	28-38 cm	L
620880-104 (4W88-XL-H)	38-54 cm	XL
Svart – Knäskydd sleeve		
620800-601 (6W100-S)	14-19 cm	S
620800-602 (6W100-M)	19-28 cm	M
620800-603 (6W100-L)	28-38 cm	L
620800-604 (6W100-XL)	38-54 cm	XL

I-Sleeve



Artikelnummer	Mått 5 cm nedan patella	Storlek
Svart		
541601-001	27,0-30,0 cm / 43,0 cm	SS
541601-002	30,0-35,0 cm / 50,0 cm	S
541601-003	34,5-37,5 cm / 56,5 cm	M
541601-004	35,0-38,0 cm / 63,0 cm	ML
541601-005	36,0-42,0 cm / 63,0 cm	L
541601-006	37,0-44,0 cm / 68,0 cm	LL
Beige		
541601-101	27,0-30,0 cm / 43,0 cm	SS
541601-102	30,0-35,0 cm / 50,0 cm	S
541601-103	34,5-37,5 cm / 56,5 cm	M
541601-104	35,0-38,0 cm / 63,0 cm	ML
541601-105	36,0-42,0 cm / 63,0 cm	L
541601-106	37,0-44,0 cm / 68,0 cm	LL

Egenskaper

- Mycket tunn knämanschett
- Kan handtvättas i 30°
- Material: Utsidan är av syntetiskt fiber och insidan är av neopren med polyuretanfilm

Om produkten

En mycket tunn, lufttät och smidig sleeve.

Easy Sleeve



Artikelnummer 3 mm	Artikelnummer 6 mm	Mått 10 cm ovan patella
720500-010 (SFR10-3)		16-19 cm
720500-016 (SFR16-3)	720501-016 (SFR16-6)	20-24 cm
720500-020 (SFR20-3)	720501-020 (SFR20-6)	25-30 cm
720500-024 (SFR24-3)	720501-024 (SFR24-6)	31-34 cm
720500-026 (SFR26-3)	720501-026 (SFR26-6)	35-37 cm
720500-028 (SFR28-3)	720501-028 (SFR28-6)	38-40 cm
720500-032 (SFR32-3)	720501-032 (SFR32-6)	41-45 cm
720500-038 (SFR38-3)		46-60 cm
720500-044 (SFR44-3)		61-70 cm

Egenskaper

- Extremt töjbar och mjuk
- Tål hård behandling
- Speciellt viktig för vaskulösa stumpar

Om produkten

En extremt töjbar och mjuk sleeve. Sleeveen är slitålig och fungerar bra till vaskulösa stumpar.

Easy Sleeve Super Stretch



Egenskaper

- Extremt töjbar och mjuk
- Tål hård behandling

Om produkten

En extremt töjbar och mjuk sleeve med en tjocklek på 6 mm. Sleeveen är slitålig och fungerar bra vid ömtålig hy, tack vare antioxidanterna i gelen.

Artikelnummer	Mått 5 cm nedan patella	Storlek
Easy Sleeve Super Stretch		
720400-016 (SLE-16)	20-24 cm	XS
720400-020 (SLE-20)	25-30 cm	S
720400-024 (SLE-24)	31-37 cm	M
720400-028 (SLE-28)	38-40 cm	L
720400-032 (SLE-32)	41-45 cm	XL
Tygöverdrag (Säljs separat)		
72401-016 (CSLE-16)	20-24 cm	XS
72401-020 (CSLE-20)	25-30 cm	S
72401-024 (CSLE-24)	31-37 cm	M
72401-028 (CSLE-28)	38-40 cm	L
72401-032 (CSLE-32)	41-45 cm	XL

Reinforced Flex Sleeve



Egenskaper

- Material: OptiGel
- Tjocklek: 3 mm
- Aktivitetsnivå: K2-K4

Om produkten

Reinforced Flex Sleeve – är en unik sleeve inom högpresterande protesutrustning. RFX® är tillverkad av antingen grått eller svart tyg, OptiGel och ett extra lager invändigt tyg över knäpartiet, vilket ger oöverträffad hållbarhet, komfort och kontroll även för de mest krävande användarna. Dessutom, med sin 30° förflexionskonstruktion, kan användarna säga adjö till obehag i knävecket och säga hej till en nivå av rörlighet och frihet.

Artikelnummer	Mått 10 cm ovan patella
Svart	
720550-020 (RFX20-3BL)	34-37 cm
720550-023 (RFX23-3BL)	36-39 cm
720550-026 (RFX26-3BL)	38-42 cm
720550-029 (RFX29-3BL)	41-46 cm
720550-032 (RFX32-3BL)	45-50 cm
Grå	
720550-300 (RFX-XX-03G), notera storleken (XX) vid beställning	

Flex Sleeve



Artikelnummer Beige	Artikelnummer Svart	Storlek
720520-120 (SFX20-3B)	720520-020 (SFX20-3G)	20-34 cm
720520-126 (SFX26-3B)	720520-026 (SFX26-3G)	30-40 cm
720520-132 (SFX32-3B)	720520-032 (SFX32-3G)	35-60 cm

Om produkten

En sleeve som kombinerar ett sömlöst tyg med Gel av hög densitet, för att ge maximal komfort och hög prestanda. Sleeveven har en tjocklek på 3 mm och fungerar bra tillsammans med vattentåliga proteser.

Flex Sleeve är 30° förflexad för att underlätta vid böjning i knät samt minska hyperextension.

Passar bra till medel- och högaktivitets-brukare.

Seamless Suspension Gel Sleeve



Artikelnummer	Storlek
720510-020 (SFB20-2)	25-30 cm
720510-024 (SFB24-2)	31-34 cm
720510-026 (SFB26-2)	35-37 cm
720510-028 (SFB28-2)	38-40 cm
720510-032 (SFB32-2)	41-45 cm

Om produkten

En sleeve som ger exceptionell komfort tack vare Gelen. Gelen fäster på brukarens hud för att uppnå en säker suspension utan att begränsa cirkulation och orsaka skjuvkrafter. Suspension sleeve har en tunn profil på 2 mm och den är det perfekta valet för den som vill ha en lättviktsprodukt.

Barn 22 mm

Dubbeladapter



Egenskaper

- Vikt 88-101 g
- Godkänd till 45 kg
- Material Titan

Artikelnummer	Längd
520006-032 (2K025-1-32)	32 mm
520006-045 (2K025-1-45)	45 mm
520006-060 (2K025-1-60)	60 mm

Lamineringsadapter



Egenskaper

- Vikt 36 g
- Godkänd till 45 kg
- Material Stål/Aluminium

Artikelnummer

520019-000 (2K042-3)

Röradapter



Egenskaper

- Storlek 22 mm
- Vikt 62 g
- Godkänd till 45 kg
- Material Aluminium

Artikelnummer

520017-000 (2K010-3)

Pyramidhona med rör



Egenskaper

- Rör 22 mm
- Vikt 186 g
- Längd 335 mm
- Godkänd till 45 kg
- Material Aluminium

Artikelnummer

520021-000 (2K070-3-02)

Hylsadapter hona



Egenskaper

- Storlek 22 mm
- Vikt 49 g
- Godkänd till 45 kg
- Material Aluminium

Artikelnummer

620017-003 (2K017-3)

Hylsblock i plast



Egenskaper

- Storlek 22 mm
- Vikt 110 g
- Godkänd till 45 kg
- Material Plast

Artikelnummer

620085-000 (2K085)

4-Öronadapter kort



Egenskaper

- Storlek 22 mm
- Vikt 91 g
- Godkänd till 125 kg
- Material Stål
- Passar till 620031-300 (Hylsadapter roterbar hane)

Artikelnummer

620029-203 (2W029-2-03)

Hylsadapter roterbar hane



Egenskaper

- Storlek 22 mm
- Vikt 38 g
- Godkänd till 45 kg
- Material Aluminium
- Passar till 620029-203 (4-Öronadapter kort)

Artikelnummer

620031-300 (2K031-3)

Hylsadapter roterbar hona



Egenskaper

- Storlek 22 mm
- Vikt 60 g
- Godkänd till 45 kg
- Material Aluminium
- Rotation +/- 20°

Artikelnummer

620043-300 (2K043-3-0)

Dubbeladapter roterbar hona



Egenskaper

- Storlek 22 mm
- Roterbar dubbeladapter
- Godkänd till 45 kg
- Material Titan

Artikelnummer	Höjd
620037-034 (2K037-1-34)	34 mm
620037-042 (2K037-1-42)	42 mm
620037-053 (2K037-1-53)	53 mm

Pyramidhona med rör



Egenskaper

- Rör 22 mm
- Vikt 169 g
- Längd 300 mm
- Godkänd till 60 kg
- Material Titan

Artikelnummer

760430-022 (TA T300 22)

Röradapter



Egenskaper

- Storlek 22 mm
- Vikt 46 g
- Godkänd till 60 kg
- Material Titan
- Bygghöjd 39 mm

Artikelnummer

760431-022 (TC T22)

4-hålsadapter hane



Egenskaper

- Storlek 22 mm
- Vikt 36 g
- Godkänd till 75 kg
- Material Titan

Artikelnummer

760432-022 (4HPA TP)

Röradapter, rör och rör med adapter 30 mm

Clamp adapter



Egenskaper

- Storlek 30 mm
- Vikt 90 g
- Godkänd till 160 kg
- Material Aluminium

Artikelnummer

650004-225 (AAA225)

Bonded Pylon, 16 Inch



Egenskaper

- Storlek 30 mm
- Längd 42 cm
- Vikt 324 g
- Godkänd till 160 kg
- Material Aluminium

Artikelnummer

650004-200 (AAA200)

Pyramidhona



Egenskaper

- Storlek 30 mm
- Vikt 73 g
- Godkänd till 125 kg
- Material Titan

Artikelnummer

520503-000 (2W010-1)

Pyramidhona med rör



Egenskaper

- Storlek 30 mm
- Längd 40 cm
- Vikt 271 g
- Godkänd till 125 kg
- Material Titan

Artikelnummer

520612-000 (2W070-1-04)

Rör AL



Egenskaper

- Storlek 30 mm
- Vikt 111-223 g
- Godkänd till 125 kg
- Material Aluminium

Artikelnummer	Längd
620200-302 (2W071-3-02)	200 mm
620200-304 (2W071-3-04)	400 mm
620200-310 (2W071-3-10)	1000 mm

Hylsadapter

3-Armsrotation adapter



Egenskaper

- Storlek 30 mm
- Vikt 164 g
- Godkänd till 125 kg
- Material Titan

Artikelnummer

520516-000 (2W030-1-01)

4 Öronadapter



Egenskaper

- Storlek 30 mm
- Vikt 52 g
- Godkänd till 125 kg
- Material Titan
- Saltvattentålig

Artikelnummer

520510-000 (2W045-1)

4-Hålsadapter

Base plate



Egenskaper

- Roterbar
- Vikt 37 g
- Godkänd till 150 kg
- Material Stål

Artikelnummer

620039-002 (2W039-2)

Splined 4-hole rotatable adapter



Egenskaper

- Roterbar
- Vikt 138 g
- Godkänd till 205 kg
- Material Titan

Artikelnummer

650005-218 (AAAHDTI218)

Rotations- & förskjutningsadapter

Dubbelhon/han adapter



Egenskaper

- Roterbar
- Längd 44 mm
- Vikt 117 g
- Godkänd till 125 kg
- Material Titan

Artikelnummer

620036-001 (2W036-1)

Dubbelhona-adapter



Egenskaper

- Roterbar
- Godkänd till 125 kg
- Material Titan

Artikelnummer	Längd	Vikt
620037-134 (2W037-1-34)	34 mm	112 g
620037-142 (2W037-1-42)	42 mm	134 g
620037-153 (2W037-1-53)	53 mm	152 g
620037-166 (2W037-1-66)	66 mm	186 g

Dubbelhona justerbar höjd adapter



Egenskaper

- Roterbar
- Monteringshöjden kan justeras 8 mm, 50-58 mm
- Vikt 160 g
- Godkänd till 125 kg
- Material Titan

Artikelnummer

620049-001 (2W049-1)

Förskjutnings-/rotationsadapter



Egenskaper

- Roterbar adapter med en ända av hona- respektive haneadapter
- Bygghöjd 57 mm
- Förskjutning +/- 10 mm
- Vikt 189 g
- Godkänd till 125 kg
- Material Titan

Artikelnummer

620089-001 (2W089-1)

3 Armsrotation/förskjutadapter hona



Egenskaper

- Rotation och förskjutning
- Vikt 227 g
- Godkänd till 125 kg
- Material Titan

Artikelnummer

620028-101 (2W028-1-01)

Förskjutningsadapter



Egenskaper

- Förskjutning +/- 10 mm
- Vikt 186 g
- Godkänd till 125 kg
- Material Titan

Artikelnummer

620086-001 (2W086-1)

Förskjutningsadapter hane



Egenskaper

- Förskjutning +/- 11 mm
- Vikt 153 g
- Godkänd till 125 kg

Artikelnummer

620043-102 (2W043-1-02)

Förskjutningsadapter hona



Egenskaper

- Förskjutning +/- 11 mm
- Vikt 154 g
- Godkänd till 125 kg

Artikelnummer

620043-101 (2W043-1-01)

Flexionsplatta

Flexionsplatta 10° Hona



Egenskaper

- Storlek 30 mm
- Vikt 130+64,5=194,5 g
- Godkänd till 136 kg
- Material Aluminium

Artikelnummer

760410-001 (4HTP10RRS)

Flexionsplatta 10°



Egenskaper

- Storlek 30 mm
- Vikt 130 g
- Godkänd till 136 kg
- Material Aluminium

Artikelnummer

760410-000 (4HTP10A)

Specialadapter

Badankel ledad



Egenskaper

- Saltvattentålig
- Vikt 316 g
- Godkänd till 125 kg
- Material Titan

Artikelnummer

620035-200 (2W080-1-02)

Ventiler

Backventil med gummitätning



Egenskaper

- Vikt 7 g
- Storlek 8,2 mm
- Material Plast

Artikelnummer

620700-265 (7W265)

Mini-Hyls ventil



Egenskaper

- Automatiskt eller manuellt luftuttag
- Vikt 30 g
- Material Plast
- Vattentät

Artikelnummer

620700-264 (7W264)

Backventil med gänga



Egenskaper

- Vikt 7 g
- Material Aluminium

Artikelnummer

620700-260 (7W260)

Liten ventil för laminering



Egenskaper

- Manuellt luftutsläpp
- Vikt 17 g
- Material Plast, stål och aluminium
- Ytterdiameter 19 mm

Artikelnummer

620700-251 (7K251)

Låssystem

Snörlås för underben



Egenskaper

- Lätt design som lätt kan appliceras
- Material Plast

Artikelnummer

620500-600 (5W600)

Snörlås för lårben



Egenskaper

- Lätt design som lätt kan appliceras
- Material Plast

Artikelnummer

620500-650 (5W650)

Kosmetik (PUR)



Egenskaper

- PUR flexibelt skum
- Anatomiskt förformad
- Hudfärgad
- 30° knäböjning

Om produkten

För lårben- och höftproteser i PUR flexibelt skum. För system med Ø 30 mm rör.

Artikelnummer Vänster	Artikelnummer Höger	Vadomkrets
620313-232 (3W313-L32)	620313-132 (3W313-R32)	32 cm
620313-236 (3W313-L36)	620313-136 (3W313-R36)	36 cm
620313-240 (3W313-L40)	620313-140 (3W313-R40)	40 cm
620313-244 (3W313-L44)	620313-144 (3W313-R44)	44 cm

Underbenskosmetik (PE)



Egenskaper

- PE-skum
- Stark kvalitet
- O-formad
- Hudfärgad

Om produkten

Tillverkad i lågviktspolyeten med extra fina porer. För system med Ø 30 mm rör.

Artikelnummer	Storlek hål	Storlek
620315-030 (3W315-30)	Ø 30 mm	480 x 160 x 160 mm

Underbenskosmetik (PUR)



Egenskaper

- PUR flexibelt skum
- O-formad
- Hudfärgad

Om produkten

Ett mycket flexibelt skum. Fungerar också för knädisartikulationsproteser. För system med Ø 30 mm rör.

Artikelnummer	Storlek hål
620314-030 (3W314-30)	Ø 30 mm

New IDIA – Snabbkosmetik



Artikelnummer

541244-001 (M1244)

Egenskaper

- Vikt 80 g
- Finns i en storlek – universal

Tillverkningstips!

Justera längd & cirkulär mått. Klipp till önskad form och montera med medföljande tyg-tejp.

Om produkten

En protes-kosmetik som går snabbt att montera. Kosmetiken är lätt att rulla på och den behöver inte slipas till.

Stumpstrumpa

Stumpstrumpa – Bomullsfrötté

ihle®



Egenskaper

- Underben och lårben
- Färg vit
- Material 85 % Bomull, 15 % Nylon
- Tvätt 60°C

Artikelnummer	Längd
Utan hål	
662500-025 (25000000 25)	25 cm
662500-030 (25000000 30)	30 cm
662500-035 (25000000 35)	35 cm
662500-040 (25000000 40)	40 cm
662500-045 (25000000 45)	45 cm
Med hål	
662505-030 (25050011 30)	30 cm
662505-035 (25050011 35)	35 cm
662505-040 (25050011 40)	40 cm
662505-045 (25050011 45)	45 cm
662555-035 (25550011 35)	35 cm Lårben – ca dubbelt så bred

Om produkten

En mjuk protesstrumpa som passar perfekt i proteshylsan när du behöver fylla ut eller vill ha extra support. Den finns i två varianter med silikonhål och utan hål samt ett flertal olika längder.

Stumpstrumpa – Tunn Bomull

ihle®



Egenskaper

- Underben och Barn/Arm
- Färg vit
- Material 80 % Bomull, 20 % Nylon/Lycra
- Tvätt 60°C

Artikelnummer	Längd
Utan hål	
662400-525 (2400502125)	25 cm (Barn/Arm)
662400-545 (2400502145)	45 cm (Barn/Arm)
662401-030 (24011011 30)	30 cm
662401-035 (24011011 35)	35 cm
662401-040 (24011011 40)	40 cm
662401-045 (24011011 45)	45 cm
Med hål	
662406-030 (24061011 30)	30 cm
662406-035 (24061011 35)	35 cm

Om produkten

En mjuk och tunn protesstrumpa som passar perfekt i proteshylsan när du behöver lite utfyllnad eller extra support. Den finns i två varianter med silikonhål och utan hål samt ett flertal olika längder.

Stumpstrumpa – Partiell Volymkontroll

ihle®



Egenskaper

- Färg vit
- Material 90 % Bomull, 8 % Nylon, 2 % Elastan
- Tvätt 95°C

Artikelnummer	Längd
Utan hål	
662520-035 (2520001135)	Distal tunn 35 cm
662530-035 (2530001135)	Distal frotte 35 cm

Om produkten

En bomullsstrumpa som består av tunn bomull och frotté. Strumpan är uppdelad så antingen tjockare nedtill och tunn upptill eller tvärtom.

Det finns en längd av vardera modellen och strumpan är utan hål.

Stumpstrumpa – Nylon

ihle®



Egenskaper

- Underben och lårben
- Färg vit
- Material 90 % Nylon, 10 % Elastan
- Tvätt 60°C

Artikelnummer	Längd
Utan hål	
662200-030 (22000000 30)	30 cm
662200-035 (22000000 35)	35 cm
662200-040 (22000000 40)	40 cm
662200-045 (22000000 45)	45 cm
Med hål	
662205-030 (22050000 30)	30 cm
662205-035 (22050000 35)	35 cm
662205-040 (22050000 40)	40 cm
662205-045 (22050000 45)	45 cm
662255-035 (22555000 35)	35 cm Lårben – ca dubbelt så bred

Om produkten

En mjuk och mycket tunn protesstrumpa som passar perfekt i proteshylsan när du behöver lite utfyllnad eller extra support.

Den finns i två varianter med silikonhål och utan hål samt ett flertal olika längder.

Stumpstrumpa – CoolMax



Skötselråd

- Tvätt 40°C (ej sköljmedel)
- Kan blekas, använd kallt vatten
- Kan torktumlas

Artikelnummer	Tjocklek	Längd	Storlek
Utan hål, för underben			
610000-140 (RK1P-12-16)	1 ply	40 cm	Medium (regular)
610000-340 (RF3-1/2-18)	3 ply	40 cm	Medium (regular)
610000-540 (RF5-1/2-18)	5 ply	40 cm	Medium (regular)
Utan hål			
611201-035 (RK1P-01-12)	1 ply	35 cm	Small (Narrow)
611212-035 (RK1P-12-12)	1 ply	35 cm	Medium (Regular)
611223-035 (RK1P-23-12)	1 ply	35 cm	Large
613516-045 (RK1P-35-16)	1 ply	45 cm	X-Large
Utan hål			
610001-368 (RF3-2/3-26)	3 ply	68 cm	Large
610002-368 (RF3-3/4-26)	3 ply	68 cm	X-Large
Med hål, för underben			
610005-125 (ØRK1P-12-12)	1 ply	25 cm	Medium
610005-140 (ØRK1P-12-16)	1 ply	40 cm	Medium
610005-325 (ØRF3-1/2-12)	3 ply	25 cm	Medium
610005-340 (ØRF3-1/2-18)	3 ply	40 cm	Medium
610005-525 (ØRF5-1/2-12)	5 ply	25 cm	Medium
610005-540 (ØRF5-1/2-18)	5 ply	40 cm	Medium
Med hål, för underben och lårben			
613520-100 (ØRKDF 01-12)	2 ply	25-35 cm	Small
615020-100 (ØRKDF 12-16)	2 ply	40-50 cm	Medium
617020-100 (ØRKDF 12-20)	2 ply	55-70 cm	Medium

Om produkten

En mjuk protesstrumpa som passar perfekt i proteshysan när du behöver fylla ut eller vill ha extra support. Materialet CoolMax är utformat för att snabbt flytta svett från huden till utsidan av tyget, vilket gör att huden känns torr och komfortabel. Strumporna är tillverkade utan sömmar, för att undvika tryck och skav.

Den finns i två varianter med textil-hål och utan hål samt ett flertal olika längder och tjocklekar.

Stumpstrumpa Open Toe – CoolMax



Art.nr 3 Ply	Art.nr 5 Ply	Längd	Mått cirkulärt proximalt	Mått cirkulärt distal	Storlek
610013-002 (SRF3-0/2-10)	610015-002 (SRF5-0/2-10)	25 cm	30-35 cm	20-25 cm	Small/ Medium X-short
610013-012 (SRF3-1/2-10)	610015-012 (SRF5-1/2-10)	25 cm	35-40 cm	20-25 cm	Medium X-short
610013-023 (SRF3-2/3-10)	610015-023 (SRF5-2/3-10)	25 cm	40-45 cm	25-30 cm	Large X-Short

Skötselråd

- Tvätt 40°C (ej sköljmedel)
- Kan blekas, använd kallt vatten
- Kan torktumlas

Om produkten

En mjuk protesstrumpa med öppen tå som passar perfekt i proteshysan när du behöver fylla ut eller vill ha extra support i den övre delen av hysan. Strumpan passar utmärkt till liners med seal-in. Materialet CoolMax är utformat för att snabbt flytta svett från huden till utsidan av tyget, vilket gör att huden känns torr och komfortabel.

Strumporna är tillverkade utan sömmar, för att undvika tryck och skav.

Strumporna finns i ytterligare längder och storlekar som specialbeställning.

Kosmetikstrumpa Underben



Artikelnummer	Benlängd	Omkrets	Fotlängd
629016-001 (6W016-1)	36 cm	25 cm	20 cm
629016-002 (6W016-2)	41 cm	25 cm	21 cm
629016-003 (6W016-3)	46 cm	27 cm	22 cm

Om produkten

En tunn hudfärgad strumpa att använda utanpå underbensprotesen. Strumpan har en stickad mudd upptill.

Förpackning: 1 par

Kosmetikstrumpa Lårben



Artikelnummer	Benlängd	Omkrets	Fotlängd
629014-000 (6W014-0)	72 cm	36 cm	20 cm
629014-001 (6W014-1)	76 cm	36 cm	20 cm
629014-002 (6W014-2)	78 cm	38 cm	20,5 cm
629014-003 (6W014-3)	80 cm	40 cm	21 cm

Om produkten

En tunn hudfärgad strumpa att använda utanpå protesens. Den passar till lårben-, knädisartikulation och höftproteser. Strumpan har ett gummiband upptill.

Förpackning: 1 par

Kosmetikstrumpa Barn



Artikelnummer	Längd
629022-002 (6W022-2)	37 cm
629022-003 (6W022-3)	44 cm

Om produkten

En tunn hudfärgad strumpa att använda utanpå protesens (lår- och underbensprotes). Passar till små och stora barn.

Förpackning: 1 st

Övriga strumpor

Tensitube Stumpkrympare



Egenskaper

- Lätt att dra på
- Kontrollerad kompression
- Minskar ödem
- Snabbare på protesstillpassningen
- Material Polyester 92 %, Lycra 8 %
- Tvätt 60°C

Artikelnummer	Omkrets (cm)	Storlek (cm)
520224-000	12,5-17,5	2"-24" 60
520324-000	22,5-30	3"-24" 60
520424-000	30-40	4"-24" 60
520524-000	38-50	5"-24" 60
520624-000	45-60	6"-24" 60

Om produkten

En elastisk tubstrumpa/stumpkrympare.

Byxa för höftex



Skötselråd

- Tvätt 40°C (ej sköljmedel)
- Kan blekas, använd kallt vatten
- Kan torktumlas

Artikelnummer	Midjemått	Storlek
615000-000 (RF3 – HPSM)	50-70 cm	Small
617000-000 (RF3 – HPMD)	70-90 cm	Medium
619000-000 (RF3 – HPLG)	90-120 cm	Large

Om produkten

En vit byxa i 2 ply med snörning i midjan. Materialet CoolMax är utformat för att snabbt flytta svett från huden till utsidan av tyget, vilket gör att huden känns torr och komfortabel. Strumporna är tillverkade utan sömmar, för att undvika tryck och skav.

Trikåslang

Trikåslang – Bomull



Om produkten

Bomullstrikåslang tillverkad av 100% bomull. Produkten är 6 cm bred.

Artikelnummer

662111-006 (2100202106)

Egenskaper

- Tvätt 95°C
- Färg vit
- Mycket töjbar

Cupping Tube



Om produkten

En 50 cm lång nylon-strumpa som är tillverkad av 100 % nylon.

Artikelnummer

662111-050 (2101001150)

Egenskaper

- 50 cm lång
- Färg vit
- Förpackning 10 st

Supertunn Nylonslang



Artikelnummer	Längd	Bredd
Vit		
521400-000 (0013600)	22,75 m	2
521500-000 (0013700)	22,75 m	3,5
Svart		
521401-000 (0014600)	22,75 m	2
521501-000 (0014700)	22,75 m	3,5

Om produkten

Mycket tunn nylonslang som töjer sig upp till 250 %. Produkten finns i två bredder och färger, vit och svart. Den breda nylon-slangen (3,5) töjer sig upp till korsettstorlek.

Övrigt

Pådragspåse – Donning Aid



Artikelnummer	Mått A (cm)	Mått B (cm)	Storlek/Färg
767000-001 (3W200-XS)	> 40	12	XS / gul
767000-002 (3W200-S)	41- 45	13	S / röd
767000-003 (3W200-M)	46- 58	13	M / mörkblå
767000-004 (3W200-L)	59- 70	15,5	L / grön
767000-005 (3W200-XL)	71- 80	16	XL / ljusblå
767000-006(3W200-XXL)	81-89	16,5	XXL / lila

Om produkten

En så kallad pådragspåse för lårben. Pådragspåsen underlättar det ibland obekväma dagliga arbetet att sätta på sig protesen för den amputerade.

Tillverkad av armerad nylon med ytterst liten friktion.

LITE Vacuum Ring



Artikelnummer	Mått	Arm liner	Silikonliner	TPE Gelliner
620700-002 (5W700-2)	16-22 cm	16-20 cm	16-21,5	S-IS
620700-003 (5W700-3)	20-38 cm		22-36	M-IL
620700-004 (5W700-4)	30-48 cm		32-45	IL-XLP
620700-005 (5W700-5)	40-55 cm		> 40	> X

Om produkten

En silikonring som limmas fast på nästan alla tygbelagda liners på alla nivåer. Används med både aktivt och passivt vakuumsystem, samt med locking liners system för att eliminera rotation.

Silikonlim

Beställs separat. 1 enhet (90 ml) silikonlim räcker till 4-5 applikationer.
Artikelnummer: 620700-631

Dictus Hip




Dictus Hip-Knee

Om produkten

Dictus Hip-Knee är ett ortopediskt hjälpmedel som skapats för att stödja användare med svaghet i höftflexorer och benmuskulatur orsakad av sjukdom eller trauma. Den hjälper till med höftflexion och lyft av benet, vilket ger kraft åt benet samt bättre gång- och rörelsekontroll. Den passar till båda sidor (universell) och med de smarta bälteskrokarna har du möjlighet till en flexibel placering av gummibandet som stödjer olika lyftriktningar efter behov.

Delar som ingår i Dictus Hip-Knee

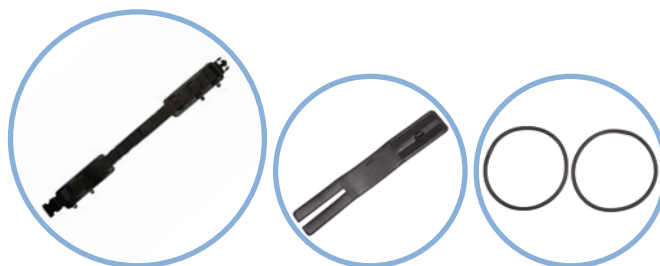

Artikelbeskrivning av alla komponenter som finns tillgängliga för Dictus Hip-Knee

Artikelnummer	Produktreferens	Produktbeskrivning	Enhet	Övrig information
530500-011	DS-50M	Dictus HIP-Knee Komplet Medium	1 set	Se måttabell
530500-021	DS-50L	Dictus HIP-Knee Komplet Large	1 set	Se måttabell
530510-011	DS-51M	Höftbälte Medium	1 st	55-80 cm omkrets / säljs separat
530510-021	DS-51L	Höftbälte Large	1 st	80-130 cm omkrets / säljs separat
530520-011	DS-52M	Lårdel Medium	1 st	30-40 cm omkrets / säljs separat
530520-021	DS-52L	Lårdel Large	1 st	40-50 cm omkrets / säljs separat
530520-031	DS-52XL	Lårdel XLarge	1 st	>50 cm omkrets / säljs separat
530530-000		Dictus Hip Hängslen	1 st	Universell
530100-050		Gummiband för Dictus HIP-Knee	1 st	50 cm / inkluderat i set
530100-040		Gummiband för Dictus HIP-Knee	1 st	40 cm / inkluderat i set
530100-001		Extra plastkrokar	Par	Säljs separat

Måttabell Dictus Hip-Knee

Produkt	Storlek Medium	Storlek Large	Extra storlekar – ej inkluderat i set, säljs separat
Höftbälte	Midjemått 55-80 cm	Midjemått 80-130 cm	
Lårdel	30-40 cm omkrets *	>40 cm omkrets *	> 50 cm omkrets, säljs separat *
Gummiband (2 st)	50 cm längd	50 cm längd	40 cm längd, säljs separat

* Lårmått 10 cm ovanför patella.



Tillbehör hängslen

Dictus Hip-Foot



Om produkten

Dictus Hip-Foot är ett ortopediskt hjälpmedel som skapats för att stödja användare med svaghet i ben och fot orsakad av sjukdom eller trauma. Ortosen hjälper höftflexorerna och lyftandet av benet såväl som foten. Den ger kraft till benet och foten i svingfasen i gångcykeln, vilket ger användaren en bättre gång och balans. Den passar till båda sidor (universell) och med de smarta bälteskrokarna har du möjlighet till en flexibel placering av gummi-bandet som stödjer olika lyftriktningar efter behov. Dictus Hip-Foot kan användas med krokar i skorna eller med Dictus Indoor-enheten som ingår i setet.

Delar som ingår i Dictus Hip-Foot



Artikelbeskrivning av alla komponenter som finns tillgängliga för Dictus Hip-Foot


Artikelnummer	Produktreferens	Produktbeskrivning	Enhet	Övrig information
530500-311	DS-53M	Dictus Hip-Foot Komplet Medium	1 set	Se måttabell
530500-321	DS-53L	Dictus Hip-Foot Komplet Large	1 set	Se måttabell
530510-011	DS-51M	Höftbälte Medium	1 st	55-80 cm omkrets / säljs separat
530510-021	DS-51L	Höftbälte Large	1 st	80-130 cm omkrets / säljs separat
530300-011	DS-03R	Fotdel för inomhusbruk, höger	1 st	Vuxen höger / säljs separat
530300-111	DS-03L	Fotdel för inomhusbruk, vänster	1 st	Vuxen vänster / säljs separat
530530-000		Dictus Hip Hängslen	1 st	Universell
530530-001		Knäkappa för extra stabilitet	1 st	Universell
530100-100		Gummiband utan knäband 100 cm	1 st	Längd 100 cm / säljs separat
530100-101		Gummiband med knäband 100 cm	1 st	Längd 100 cm / inkluderat i set
530100-080		Gummiband med knäband 80 cm	1 st	Längd 80 cm / säljs separat
530100-120		Gummiband med knäband 120 cm	1 st	Längd 120 cm / säljs separat
530100-003		S-krokar, stål	1 par	Säljs separat
530100-002		Monokrok till Dictus	1 st	Säljs separat
530100-001		Extra plastkrokar	1 par	Säljs separat

Måttabell Dictus Hip-Foot Höftbälte


Storlek Medium	Storlek Large
Midjemått 55-80 cm	Midjemått 80-130 cm

Måttabell Dictus Hip-Foot Gummiband

Mått	Standard 100 cm	Extra långt 120 cm	Extra kort 80 cm
	Inkluderat i set	Ej inkluderat, säljs separat	Ej inkluderat, säljs separat
Användarens längd, ca	160-183 cm	>183 cm	<160 cm

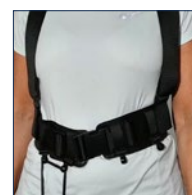

Tillbehör hängslen

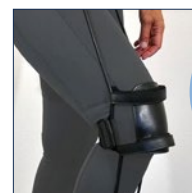

Knäkappa

Dictus Droppfotsortos

Dictus Original




Om produkten

Dictus Original är ett ortopedtekniskt hjälpmedel som hjälper till och underlättar gången, samt minskar risken att snubbla/ramla. Dictusbandet är lätt att ta av och på samt det tar ingen plats i skorna och det är enkelt att variera mellan olika skor. Hjälpmedlet passar för både barn och vuxna. Dictus original består av ett mjukt läderband som är fäst runt fotleden med kardborreband. På fotledsbandet är ett gummiband placerat, anslutet till krokar som fästs i skon. Du kan välja mellan antingen monokrok eller två stål-krokar. Du kan också använda Dictus Original med en inomhusdel som nämns senare i katalogen.

Om du vill ge Dictusbandet en ljusare färg, kan du enkelt använda vår strumpa som placeras över ankelbandet.

Artikelbeskrivning av alla komponenter som finns tillgängliga för Dictus Original

Artikelnummer	Produkterferens	Produktbeskrivning	Enhet	Övrig information
530200-000	DS-02J	Dictus Original Junior	1 set	Omkrets vrist 12-17 cm
530200-011	DS-02M	Dictus Original Medium	1 set	Omkrets vrist 15-20 cm
530200-021	DS-02L	Dictus Original Large	1 set	Omkrets vrist 20-27 cm
530200-031	DS-02XL	Dictus Original XL	1 set	Omkrets vrist >26 cm
530100-041		Gummiband std length 180 mm circ.	1 st	Omkrets 180 mm / säljs separat
530100-241		Gummiband -20 mm jämfört med std	1 st	Säljs separat
530100-341		Gummiband -30 mm jämfört med std	1 st	Säljs separat
530100-941		Gummiband -9 mm jämfört med std	1 st	Säljs separat
530100-003		S-krokar, stål	1 par	Säljs separat
530100-002		Monokrok med bas i plast	1 st	Säljs separat
530100-001		Extra plastkrokar	1 par	Säljs separat
530100-500		Dictus täckstrumpa	1 st	Beige

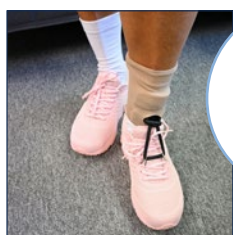

Dictus täckstrumpa

Dictus Flex



Om produkten

Dictus Flex är en utveckling baserad på Dictus Original. Det är ett fantastiskt droppfotshjälpmiddel som ger bra stöd till personer med försvagad fotflexion orsakad av antingen skada eller sjukdom. Dictus Flex består av ett mjukt läderband som fästs runt fotleden med kardborreband. Det yttre tyget på Dictus Flex gör det möjligt att placera ett kardborreband med gummiband på. Gummibandet dras genom en central D-ring och fästs sedan med krokarna på en sko. Du kan välja mellan monokrok eller två stål-krokar. Du kan också använda Dictus Flex med en inomhusdel som nämns senare i katalogen. Önskas mera lyft av foten är det enkelt att spänna flex-gummibandet ytterligare. Det är också smidigt att variera mellan olika skor. Hjälpmidlet passar också för både barn och vuxna.

Om du vill ge Dictusbandet en ljusare färg, kan du enkelt använda vår strumpa som placeras över ankelbandet.

Artikelbeskrivning av alla komponenter som finns tillgängliga för Dictus Flex


Artikelnummer	Produktreferens	Produktbeskrivning	Enhet	Övrig information
530400-000	DS-04J	Dictus Flex Junior	1 set	Omkrets vrist 12-17 cm
530400-011	DS-04M	Dictus Flex Medium	1 set	Omkrets vrist 15-20 cm
530400-021	DS-04L	Dictus Flex Large	1 set	Omkrets vrist 20-27 cm
530400-031	DS-04XL	Dictus Flex XL	1 set	Omkrets vrist >26 cm
530100-400		Flex gummiband 35 cm	1 st	För Junior / Medium
530100-440		Flex gummiband 40 cm	1 st	För Large / X-large
530100-003		S-krokar, stål	1 par	Säljs separat
530100-002		Monokrok med bas i plast	1 st	Säljs separat
530100-001		Extra plastkrokar	1 par	Säljs separat
530100-500		Dictus täckstrumpa	1 st	Beige

Dictus Indoor



Om produkten

Många Dictus-användare föredrar att inte behöva bära skor inomhus. Då är Dictus Indoor perfekt. Den separata inomhusdelen ska användas tillsammans med Dictus Original eller Dictus Flex. Den är också en standarddel av Dictus Hip-Foot-settet. Dictus Indoor består av en mjuk och slitstark lädermanschett med två plastkrokar. Den ska placeras på framfoten och kopplas till gummibandet och ankelbandet för lyft. För detaljer om ankelbandet – se Dictus Original och Dictus Flex.

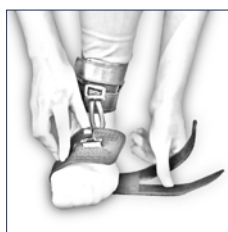

Artikelnummer	Produktreferens	Produktbeskrivning	Enhet	Övrig information
530300-000	DS-03J	Dictus Indoor Junior	1 set	Barn, höger/vänster
530300-011	DS-03R	Dictus Indoor Höger	1 set	Vuxen, höger
530300-111	DS-03L	Dictus Indoor Vänster	1 set	Vuxen, vänster

Droppfotsortoser

PregFIX® AFO Anterior EasyFit



Artikelnummer Vänster	Artikelnummer Höger	Storlek/Skostorlek
Anterior EasyFit - kolfiber		
790026-001	790026-101	Small / 33-38
790026-002	790026-102	Medium / 38-43
790026-003	790026-103	Large / 43-48
Anterior EasyFit Combi - kolfiber/glasfiber		
790028-001	790028-101	Small / 33-38
790028-002	790028-102	Medium / 38-43
790028-003	790028-103	Large / 43-48
Polstring - en storlek		
790029-000	790029-100	

Indikationer för användning

- Peroneuspares (droppfot)
- Droppfot efter Stroke
- MS (Multiple Skleros)
- Nedsatt muskelstyrka efter trauma
- Nervskada – svårt att få med sig foten i gången

Om produkten

En stabil droppfotsskena som finns i två utföranden med en blandning av kolfiber och glasfiber som gör ortosen mer flexibel i materialet. Eller ren kolfiber som gör ortosen extra stadig.

Ortosen köps komplett och är färdigmonterad med polstring och band. Ortosen har en väl tilltagen främre bygel som fördelar tryck på ett fördelaktigt sätt. Enkel att applicera med två stycken kardborreband och fotbladet kan både slipas eller klippas efter önskad form för bra placering i skor.

Detta hjälpmedel kan bidra till en bättre och stadigare gång för därmed ökad trygghet.

Easy Walk Advance II



Artikelnummer Vänster	Artikelnummer Höger	Storlek	Skostorlek	Höjd
680012-A00 (AFO12A=LXS)	680012-A10 (AFO12A=RXS)	XS	34-36	32,5 cm
680012-A01 (AFO12A=LS)	680012-A11 (AFO12A=RS)	S	36-39	33,5 cm
680012-A02 (AFO12A=LM)	680012-A12 (AFO12A=RM)	M	39-42	34,5 cm
680012-A03 (AFO12A=LL)	680012-A13 (AFO12A=RL)	L	42-45	35,5 cm
680012-A04 (AFO12A=LXL)	680012-A14 (AFO12A=RXL)	XL	45-47	37,5 cm
Magnetspänne: 680010-C00				

Om produkten

Gjord av pre-preg kolfiber och är optimerad för tå-lyft, samtidigt som ortosen är lätt och tunn. Vadbygeln är designad så den smidigt anpassar sig till olika vad-former och återger energi under gången. Ett nytt fastsättningssystem med smart magnetlås, låset är hållbart och det är lätt att justera längden på remmen.

Magnetlåset kan köpas separat.

AFO PP-Skena



Artikelnummer Vänster	Artikelnummer Höger	Storlek	Längd/Storlek
Vit – polypropen			
775243-000 (M.9050L SM)	775240-000 (M.9050R SM)	Small	24,5 cm/35-39
775244-000 (M.9050L M)	775241-000 (M.9050R M)	Medium	29 cm/40-43
775247-000 (M.9050L L)	775246-000 (M.9050R L)	Large	34 cm/41-44
775245-000 (M.9050L XL)	775242-000 (M.9050R XL)	X-Large	39 cm/>44
Grå – polypropen med kolfiber-inblandning			
775243-100 (M.9051L SM)	775240-100 (M.9051R SM)	Small	24,5 cm/35-39
775244-100 (M.9051L M)	775241-100 (M.9051R M)	Medium	29 cm/40-43
775247-100 (M.9051L L)	775246-100 (M.9051R L)	Large	34 cm/41-44
775245-100 (M.9051L XL)	775242-100 (M.9051R XL)	X-Large	39 cm/>44

Om produkten

En droppfotsortos med öppen häl som eliminerar tryck över calcaneus. Mjuk polstring skyddar vaden. Kardborreband.

Kan formas om och individanpassas med hjälp av värme för bättre passform. Använd ortosen tillsammans med en stabil sko.

AF Servo



Artikelnummer Vänster	Artikelnummer Höger	Skostorlek	Storlek
715320-000	715330-000	30-36	Small
715340-000	715350-000	36-39	Medium
715360-000	715370-000	39-42	Large
715380-000	715390-000	42-46	X-Large

Om produkten

En ready-to-go AFO (Ankel fotortos) för mild droppfot, på grund av stroke, ryggrad eller nervskador, som orsakar gångsvårigheter i det dagliga livet.

AF Servo's svängrattlås garanterar bekväm passform.

Viloortoser

UFO – Viloortos



UFO Vuxen

Artikelnummer	Storlek	Fot (cm)	Ortos höjd (cm)
702200-001	Small	24-28	33
702200-002	Medium	28-31	35
702200-003	Large	31-34	38
702200-004	XLarge	34<	40

UFO Barn

Artikelnummer	Storlek	Skostorlek	Ortos höjd (cm)
702732-001 (27321)	Small	16-23	18
702732-002 (27322)	Medium	24-27	22
702732-003 (27323)	Large	28-31	25

Om produkten

En ortos som bryter den negativa spiralen av skada, inflammation, smärta och ny skada, genom att försiktigt stretcha vävnaden i vaden nattetid. Patienten kan själv bestämma och ändra vilken töjningsgrad som är lämplig för att uppnå maximal smärtreduktion. Ortosens grundinställning är 5° dorsalflektion, den kan enkelt med hjälp av kardborreband ändras till max 15°.

Multipodus – Viloortos



Artikelnummer	Storlek
Multipodus	
700022-030	Large -> 39
700022-031	X-Large ->49
Polstring	
700090-030	Large
700090-031	X-Large

Om produkten

En mjuk viloortos med utbytbar polstring. Fotbladets längd kan justeras för bättre passform. Toppstöd finns för bättre positionering i liggläge, fungerar för både höger och vänster fot.

Ortos-strumpor

ihle®



Ortos-strumpa KAFO – Bomull

Egenskaper

- Material 90 % Bomull, 8 % Nylon och 2 % Elastan

Skötselråd

- Tvätt 60°
- Använd ren socka varje dag

Artikelnummer	Skostorlek
Vit	
665001-312 (50470011121002)	35-38
665001-313 (50470011131002)	39-42
665001-314 (50470011141002)	43-46
Svart	
665000-312 (50470001121002)	35-38
665000-313 (50470001131002)	39-42
665000-314 (50470001141002)	43-46

Om produkten

70 cm lång strumpa med häl. Strumpan säljs styckvis, finns i två färger: svart och vit.

Ortos-strumpa KAFO – CoolMax 2 ply

ROYAL KNIT



Skötselråd

- Tvätt 40° (ej sköljmedel)
- Kan blekas, använd kallt vatten
- Kan torktumlas
- Använd ren socka varje dag

Artikelnummer	Längd	Bredd-tå	Storlek
Vit			
617018-000 (ROBS O1-24)	90 cm	10 cm	Small
619520-000 (ROBS 12-28)	100 cm	13 cm	Medium
Svart			
617018-001 (BROBS O1-24)	90 cm	10 cm	Small
619520-001 (BROBS 12-28)	100 cm	13 cm	Medium

Om produkten

En ortos-strumpa i 2 ply utan häl. Materialet CoolMax är utformat för att snabbt flytta svett från huden till utsidan av tyget, vilket gör att huden känns torr och komfortabel. Strumporna är tillverkade utan sömmar, för att undvika tryck och skav.

Ortos-strumpa AFO/KAFO – CoolMax 2 ply



Skötselråd

- Tvätt 40° (ej sköljmedel)
- Kan blekas, använd kallt vatten
- Kan torktumlas
- Använd ren socka varje dag

Artikelnummer	Längd	Bredd-tå	Storlek
Vit			
615516-000 (ROBS O1-16)	50 cm	10 cm	Small
617020-000 (ROBS 12-16)	50 cm	13 cm	Medium
615520-000 (ROBS O1-20)	70 cm	10 cm	Small
619518-000 (ROBS 12-20)	70 cm	13 cm	Medium
Svart			
615516-001 (BROBS O1-16)	50 cm	10 cm	Small
617020-001 (BROBS 12-16)	50 cm	13 cm	Medium
615520-001 (BROBS O1-20)	70 cm	10 cm	Small
619518-001 (BROBS 12-20)	70 cm	13 cm	Medium

Om produkten

En ortos-strumpa i 2 ply utan häl. Materialet CoolMax är utformat för att snabbt flytta svett från huden till utsidan av tyget, vilket gör att huden känns torr och komfortabel. Strumporna är tillverkade utan sömmar, för att undvika tryck och skav.

Ortos-strumpa Barn – CoolMax 1 ply



Skötselråd

- Tvätt 40° (ej sköljmedel)
- Kan blekas, använd kallt vatten
- Kan torktumlas
- Använd ren socka varje dag

Artikelnummer	Längd	Storlek/Bredd
Vit		
611200-010 (RK1P-0A-04)	10 cm	X-Small (Child)
611200-020 (RK1P-0A-08)	20 cm	X-Small (Child)
611200-040 (RK1P-0A-14)	40 cm	X-Small (Child)
Svart		
611200-021 (BRK1P-0A-08)	20 cm	X-Small (Child)
611200-041 (BRK1P-0A-14)	40 cm	X-Small (Child)

Om produkten

En ortos-strumpa i 1 ply utan häl. Materialet CoolMax är utformat för att snabbt flytta svett från huden till utsidan av tyget, vilket gör att huden känns torr och komfortabel. Strumporna är tillverkade utan sömmar, för att undvika tryck och skav.

Ortos-strumpa Barn – CoolMax 2 ply



Skötselråd

- Tvätt 40° (ej sköljmedel)
- Kan blekas, använd kallt vatten
- Kan torktumlas
- Använd ren socka varje dag

Artikelnummer	Längd	Storlek
Vit		
614008-000 (RKDF-0A-08)	20 cm	X-Small
614013-000 (ROBS OA-14)	40 cm	X-Small
Svart		
614008-001 (BRKDF-0A-08)	20 cm	X-Small
614013-001 (BROBS OA-14)	40 cm	X-Small

Om produkten

En ortos-strumpa i 2 ply utan häl. Materialet CoolMax är utformat för att snabbt flytta svett från huden till utsidan av tyget, vilket gör att huden känns torr och komfortabel. Strumporna är tillverkade utan sömmar, för att undvika tryck och skav.

Tåstrumpa 2 ply



Skötselråd

- Tvätt 40° (ej sköljmedel)
- Kan blekas, använd kallt vatten
- Kan torktumlas
- Använd ren socka varje dag

Artikelnummer	Längd	Storlek
610000-001 (TOE-SM-12)	20 cm	Small
610000-002 (TOE-MD-16)	42 cm	Medium
610000-003 (TOE-LG-16)	42 cm	Large

Om produkten

En vit ortos-strumpa i 2 ply utan häl med form för stortån. Materialet CoolMax är utformat för att snabbt flytta svett från huden till utsidan av tyget, vilket gör att huden känns torr och komfortabel. Strumporna är tillverkade utan sömmar, för att undvika tryck och skav. Strumporna passar både barn och vuxna. Säljs styckvis.

T-shirt/Linnen

Korsettlinne – V-Ringad



Artikelnummer	Midjemått (cm)	Storlek
610200-001 (VTLSO-SX-12)	30-50	Xtra Small
610200-002 (VTLSO-SM-14)	40-68	Small
610200-003 (VTLSO-MD-16)	55-93	Medium
610200-103 (VTLSO-MDL-16)	55-93	Medium Long
610200-005 (VTLSO-LG-20)	76-127	Large
610200-105 (VTLSO-LGL-20)	76-127	Large Long
610200-007 (VTLSO-XL-24)	91-152	Xtra Large

Skötselråd

- Tvätt 40° (ej sköljmedel)
- Kan blekas, använd kallt vatten
- Kan torktumlas

Om produkten

Detta korsettlinne är tillverkat i CoolMax, och utformat för att snabbt flytta svett från huden till utsidan av tyget, på så vis känns huden torr och komfortabel. Tillverkad utan sömmar och skrynklar sig inte som ett vanligt linne tenderar att göra.

Korsettlinne – Axilla Flaps



Artikelnummer	Midjemått (cm)	Storlek
610100-001 (FTLSO-SX-12)	30-50	Xtra Small
610100-002 (FTLSO-SM-14)	40-68	Small
610100-003 (FTLSO-MD-16)	55-93	Medium
610100-103 (FTLSO-MDL-16)	55-93	Medium Long
610100-005 (FTLSO-LG-20)	76-127	Large
610100-105 (FTLSO-LGL-20)	76-127	Large Long
610100-007 (FTLSO-XL-24)	91-152	Xtra Large

Skötselråd

- Tvätt 40° (ej sköljmedel)
- Kan blekas, använd kallt vatten
- Kan torktumlas

Om produkten

Detta korsettlinne är tillverkat i CoolMax, och utformat för att snabbt flytta svett från huden till utsidan av tyget, på så vis känns huden torr och komfortabel. Tillverkad utan sömmar och skrynklar sig inte som ett vanligt linne tenderar att göra.

Korsett T-shirt



Skötselråd

- Tvätt 60° (ej sköljmedel)
- Kan blekas, använd kallt vatten
- Kan torktumlas

Om produkten

Passar perfekt under korsetten för att undvika obehag och skav. T-shirten finns i vitt till både vuxna och barn.

Material: 96 % Bomull och 4 % Elastan

Barn

Artikelnummer	Storlek
668300-000 (83000 000 00)	110
668300-001 (83000 000 01)	116
668300-002 (83000 000 02)	128
668300-003 (83000 000 03)	134
668300-004 (83000 000 04)	140
668300-005 (83000 000 05)	146
668300-006 (83000 000 06)	152
668300-007 (83000 000 07)	158
668300-008 (83000 000 08)	164

Vuxen

Artikelnummer	Storlek
668300-009 (83000 000 09)	Small
668300-010 (83000 000 10)	Medium
668300-011 (83000 000 11)	Large
668300-012 (83000 000 12)	X-Large
668300-013 (83000 000 13)	XX-Large

Vi vill möjliggöra för alla människor med funktionsvariationer att leva ett optimalt liv.

Läs mer om oss och våra
produkter på www.erimed.se



www.erimed.se



Stensättravägen 9A
127 39 Skärholmen
Tel: +46 (0)8 - 449 56 50
E-post: info@erimed.se

Grafisk design och tryck: ClearDesign.se

Bilder: Erimed, College Park, Trulife,
Alps, Wagner, Ihle, ST&G

